


機械器具 7 4 医薬品注入器
*一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000
インジェクションプラグ (I-plug)**

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- フード針は、斜めに穿刺しないこと。[斜めに穿刺してロックすると、ゴム穿刺部の内部で針の向きが矯正され、針とゴムの間に隙間が生じ、接続部から薬液等が漏れる可能性がある。]

【形状・構造及び原理等】

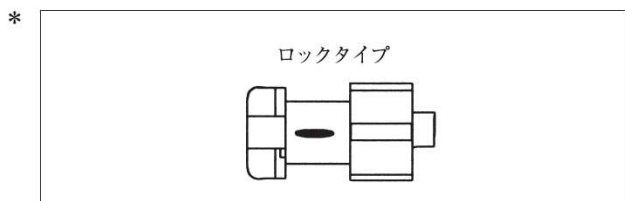


- 上記は代表例であります。
- 本品にはチューブ、コネクター等、他の構成部品が付く仕様もあります。
- *○本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:トリメリット酸トリ-2-エチルヘキシル)を使用しております(チューブ付き仕様に限る)。
- *○従来の新型フード針と本品は互換性がありません。

【使用目的、効能又は効果】

注射筒又は注射針等をチューブ、コック、その他の構造に接続する器具である。ルーアロック付のものやルーアロックなしのものがある。またチューブ付のものもある。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を開封後、本品を取り出して下さい。
 2. 他の医療機器と速やかに接続して下さい。
 - * 3. 穿刺針などを用いて薬剤を混注して下さい。持続注入する場合はフード針を用いて下さい。
- *◎フード針の接続方法
フードと本体の青いマークの向きを合わせて真っ直ぐ止まるまで刺し込みます。

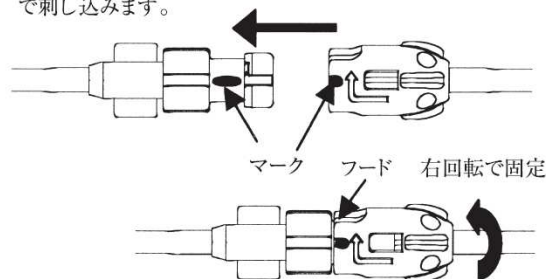

【フード針の使用上の注意】

- フード針を保持してゴム穿刺部に真っ直ぐ穿刺すること。
- 穿刺後、フードを回して外れないようロックすること。
- 誤ってフード針を斜めに穿刺してロックすると、ゴム穿刺部の内部で針の向きが矯正され、針とゴムの間に隙間が生じ接続部から漏れる可能性があるので注意すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
- *○使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について定期的に確認すること。
 - *○脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤またはアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、三方活栓及びコネクターのひび割れについて注意すること。[薬液により三方活栓及び延長チューブ等のメスコネクターにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
 - *○ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
 - 医薬品の添付文書を確認後、使用すること。
 - 開封は使用直前に行うこと。
 - 他の医療機器と接続する場合は、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
 - *○薬剤を混注する場合は、針を使用し、針は垂直に刺すこと。また、持続注入する場合は、フード針を用いて外れないようにしっかり接続すること。
 - 消毒用エタノール等で消毒後、速やかに穿刺すること。
 - 混注口には手を触れないこと。
 - 混注口が汚れた場合は、新しい製品に交換すること。
 - *○使用後は、感染防止に十分留意し、安全な方法で処分すること。なお、フード針の針部にプロテクターをかぶせる場合は、誤刺に注意し、慎重に行うこと。
 - 万一、包装が破損している場合、または、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光および高温・多湿を避けて保管すること。

使用期限

包装の使用期限を参照のこと(自己認証による)。

【包装】

1箱 1~100本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売(お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号: 06-6372-2331 (代表)

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社