

ニプロルアーコネクション


再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、医薬品が充填された注射筒やパイアルに針管を穿刺して接続し、針基部を輸液関連器具やカテーテル等のコネクタに接続し、薬液等に移注する目的で使用する滅菌済みの針付きコネクタである。ステンレス製の針管と合成樹脂製の針基、およびそれらを収納するコンテナとコンテナキャップによって構成されている。

**

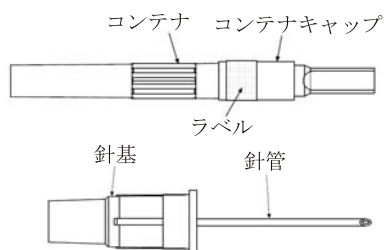

【使用目的、効能又は効果】

注射筒又は注射針等をチューブ、コック、その他の構造に接続する器具である。ルアーロック付きのものやルアーロックなしのものがある。

** 【品目仕様等】

○引き抜き強さ

針管の中心軸方向に次の表の荷重を加えたとき、針管は針基から引き抜けるものではないこと。

公称外径(mm)	荷重(N)	公称外径(mm)	荷重(N)
0.3~0.5	22	0.8	44
0.5~0.65	34	0.9	54
0.7	40	1.1以上	69

○漏れ

0.2MPaのゲージ圧で水を送り込み、15秒間観察したとき針と針基とルアーテーパゲージとのはめ合わせ部より、水滴となって落ちるような水漏れを認めない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 容器の両端を持ち、回転させて開封してください。
〈注意〉開封は使用直前に行ってください。
2. キャップを外して、本品を注射薬容器兼注射器の筒先に押し込み連通させてください。
3. まっすぐ引くようにしてコンテナを外し、カテーテルやコネクタ等の他の医療機器と接続してください。
〈注意〉接続部について十分嵌合したことを確認の上、使用してください。
4. 薬剤が全部注入されたら、他機器から取り外してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 万一、容器、シール紙が損傷、汚損している場合、又は、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 医薬品の添付文書を確認後、使用すること。又、他の医療機器に接続して使用する場合、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- 使用後は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間・使用の期限

包装箱の使用期限を参照のこと（自己認証による）。

* 【包装】

50本、100本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社