

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000

ニプロルアーコネクション

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は、医薬品が充填された注射筒やバイアルに針管を穿刺して接続し、針基部を輸液関連器具やカテーテル等のコネクタに接続し、薬液等を移注する目的で使用する滅菌済みの針付きコネクタである。ステンレス製の針管と合成樹脂製の針基、およびそれらを収納するコンテナとコンテナキャップによって構成されている。

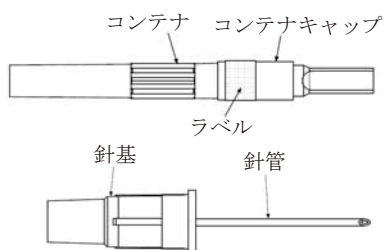

2. 材質

針管：ステンレス鋼

針基：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

注射筒又は注射針等をチューブ、コック、その他の構造に接続する器具である。ルアーロック付きのものやルアーロックなしのものがある。

【使用方法等】

1. 容器の両端を持ち、回転させて開封してください。
2. コンテナキャップを外して、本品を注射薬容器兼注射器の筒先に押し込み連通させてください。
3. まっすぐ引くようにしてコンテナを外し、カテーテルやコネクタ等の他の医療機器と接続してください。
4. 薬剤が全部注入されたら、他機器から取り外してください。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 誤って手指等に注射針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 接続部について十分嵌合したことを確認の上、使用してください。
3. コンテナキャップを外すとき、針先がコンテナキャップに触れないよう注意してください。[コンテナキャップが注射針に触れると針先が変形し、穿刺しづらくなるおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) リキャップしないこと。[リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がコンテナキャップを貫通するおそれがある。]

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- ・ 本品の破損
- ・ 針の曲がり、変形
- ・ 誤穿刺
- ・ コアリング

2) その他の有害事象

- ・ 刺し傷

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

有効期間：滅菌後3年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社