

機械器具 74 医薬品注入器
* 一般医療機器 輸液用連結管 70399000

ニプロ連結管 (DEHP可塑剤フリー)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、輸液療法などに用いる連結管である。

(各部の名称)

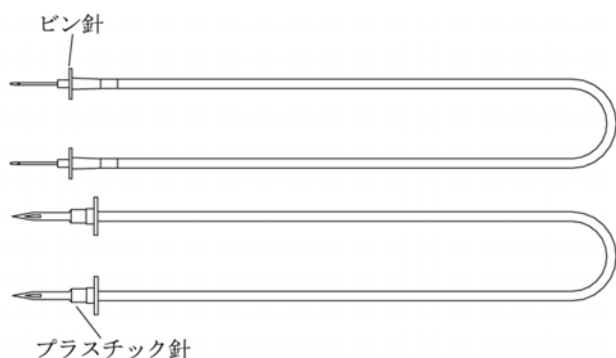

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリ-2-エチルヘキシル）を使用している。

*【使用目的、効能又は効果】

チューブの両端に薬液瓶又は他の器具との接続部をもつ連結管をいう。輸液で薬液瓶内の液を移すために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品の切り口部より取り出し、ピン針又はプラスチック針のプロテクターを取り除いて容器のゴム栓の○印中央に、真直ぐいっぱいの深さまで穿刺し連結させて下さい。また、バッグ等への穿刺部にはピン針を穿刺して下さい。
2. 薬液との接液部分には手を触れないよう注意し、十分接続されたことを確認の上、使用して下さい。
3. 輸液容器がガラスビンの場合は、連結した最後の容器にエアークラスを刺して下さい。
4. チューブ内に満たして使用する場合は、一端を上にして薬液を完全に導いてから使用して下さい。

*＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 本品のピン針等の針部には直接手を触れないで下さい。
2. 輸液容器等のゴム栓（○印）に斜めに刺通したり横方向に力を加えると、ピン針等に曲がりや破損が生ずる場合があります。
3. プライミング時に接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。
4. 本品は、血液バッグに使用しないで下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 万一、包装が破損や汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 開封は使用直前に行うこと。
- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれ

の使用法、使用上の注意に従って使用すること。

- *○あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- *○プライミング後は直ちに薬液を投与すること。〔薬液が汚染される可能性がある。〕
- *○チューブが折り曲げられたり、引っ張られた状態で使用しないこと。
- *○チューブ等が身体の下等に挟まれないよう注意すること。〔チューブ等の折れ、閉塞、破損等が生じる可能性がある。〕
- *○チューブを鉗子等でつまんで傷をつけないように、さらに、はさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。〔液漏れや破損が発生する可能性がある。〕
- *○チューブ及びチューブの接続部には過度に引っ張る、押し込む、折り曲げるような負荷を加えないよう注意すること。〔チューブの抜け、破損、伸び等が生じる可能性がある。〕
- *○脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマン油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は注意すること。〔薬液によりひび割れ等が生じる可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。〕
- *○ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 使用後は、感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間・使用の期限

内箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】

50本/箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造（輸入先）

ニプロ・タイランド・コーポレーション

[NIPRO (THAILAND) CORPORATION LIMITED]

タイ王国

[Thailand]



ニプロ株式会社