

ブラント針


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品は刃先がないので、注射に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は針管、針基及びプロテクターからなる。

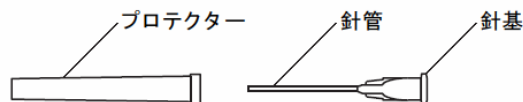

*【使用目的、効能又は効果】

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる器具をいう。

【操作方法又は使用方法等】

本品は1回限りの使い捨て、再使用しないで下さい。

1. 包装を開封し、注射針を包装内から取り出します。
2. 本品をシリンジにしっかり付けます。
3. プロテクターをまっすぐ引いて外し、使用します。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 本品の針管部には直接手を触れないよう注意して下さい。
- *2. 針基に過剰な負荷をかけないで下さい。また、接続時はプロテクターで針基に過剰な回転負荷をかけないで下さい。[針管又は針基が破損する可能性があります。]
- *3. 接続部に薬液又は血液を付着させないで下さい。[接続部の緩み等が生じる可能性があります。]
- *4. プロテクターをかぶせる際には、誤刺及びプロテクターからの針の飛び出しに注意して慎重に行ってください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- *2. 使用するにあたって、目的とする製品であることを確認すること。
- *3. 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- *4. あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。使用中は本品の破損、接続部の緩み、薬液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
- *5. プラスチック製品なので、低温時の取扱いには注意すること。[針管又は針基が破損する可能性がある。]
6. 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
外箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】

100本／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331(代表)

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic Of China]



ニプロ株式会社