

機械器具 74 医薬品注入器

\* 一般医療機器 採液針 70324000

# ニプロプラスチック針（カテーテル）


再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 注射には使用しないこと。

## 【形状・構造及び原理等】

本品はプラスチック針及びプロテクターからなる。

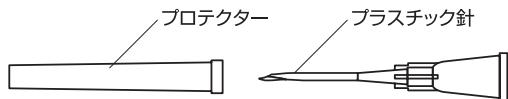

\* 本品はポリカーボネート樹脂を使用している。

## \*【使用目的、効能又は効果】

シリンジに取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために用いる採液針である。

## 【操作方法又は使用方法等】

\* 本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できます。

1. 包装を開封し、本品を包装内から取り出します。
2. シリンジ、コネクター等に確実に接続します。
3. バイアル等の薬液容器から薬液を採取します。

## \* <使用方法に関連する使用上の注意>

1. 本品のプラスチック針には直接手を触れないよう注意して下さい。
2. 接続部への薬液等の付着に注意して下さい。[接続部の緩み等が生じる可能性があります。]
3. プラスチック針をバイアルや輸液容器等のゴム栓に穿刺する場合は、なるべく刺通面に垂直に刺し、横方向に力を加えたり、同一部位に穿刺されることがないように注意して下さい。
4. 本品に強い力を加えないよう注意して下さい。[破損する可能性があります。]
5. 接続部からの薬液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。

## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- \* ○使用するにあたって、目的とする製品であることを確認すること。
- \* ○併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。
- 使用中は本品の破損、接続部のゆるみ、薬液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。

- \* ○接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[外れなくなる又は、本体が破損し、接続部からの薬液漏れ等が生じる可能性がある。]
- \* ○プラスチック製品なので、低温時での取扱いには注意すること。[製品が破損する可能性がある。]
- \* ○薬液を針管に長時間接触させないこと。[薬液が結晶化し、針管に詰まる可能性がある。]
- \* ○接続部を汚染させないこと。
- \* ○使用期限の過ぎたものは使用しないこと。
- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は安全な方法で処分すること。

## \* 2. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

### <併用注意（併用に注意すること）>

- 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品に使用する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、本品のひび割れについて注意すること。[薬液により本品にひび割れが生じ、薬液漏れ等の可能性がある。なお、過度の締め付け及び繰り返しの締め付け等はひび割れの発生を助長する要因となる。]
- ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿をさけて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限  
箱に記載の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

## \*【包装】

100本／箱

## \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）  
ニプロ株式会社  
大阪市北区本庄西3丁目9番3号  
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造  
ニプロ株式会社