

機械器具 74 医薬品注入器

* 一般医療機器 調整用薬液注入コネクタ 70396000

ニプロインジェクションプラグ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、血液バッグ又は分離バッグ等の膜付きチューブに挿入し、血液又は薬液等を注入・排出するためのプラスチック針、ゴムボタン等からなる。

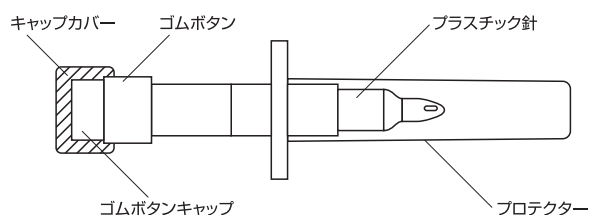

*【使用目的、効能又は効果】

血液バッグや薬液容器などに装着して、バッグ内や薬液容器などに薬液などを注入・排出するために用いる器具をいう。

【操作方法又は使用方法等】

1. 切り口部より開封し、本品を取り出します。
2. プラスチック針のプロテクターを取り外します。
＜注意＞嵌合部には直接手を触れないよう注意してください。
3. バッグの排出ポートを開封します。
4. バッグの膜付チューブにプラスチック針を挿入します。
＜注意＞十分嵌合していることを確認して下さい。
5. ゴムボタンキャップを外し、針付シリンジをゴムボタンに穿刺します。
＜注意＞穿刺には十分注意して下さい。
6. シリンジのプランジャーを引いて、バッグ内の血液等を取り出します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- * ○接続する凍結バッグ等の添付文書等を参照すること。
- 万一、包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 開封は使用直前に行うこと。
- 使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
外箱の使用期限欄を参照のこと(自己認証による)。

【包装】

50本／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売(お問い合わせ先)
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号: 06-6372-2331(代表)

製造
ニプロ株式会社



ニプロ株式会社