

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000

ニプロカテーテル用シリンジ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 注射には用いないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は外筒、押し子及びガスケットからなる。

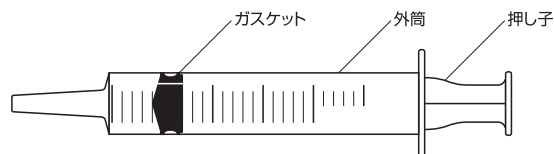

【使用目的、効能又は効果】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して経腸栄養剤を投与する器具をいう。

【操作方法又は使用法等】

1. 本品の包装を開口部より開き、注射筒の方を持ち、包装から取り出します。滅菌されているのでそのまま使用できます。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 他の医療機器と併用する場合は、確実に接続又は取り付けられていることを確認して使用して下さい。
2. 接続部への薬液等の付着に注意して下さい。[接続部の緩み等が生じる可能性があります。]
3. コネクター等と接続する際、筒先に横方向の力を加えないで下さい。[筒先の湾曲や破損等が生じる可能性があります。]
4. 本品に強い力を加えないよう注意して下さい。[破損する可能性があります。]
5. 接続部から液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 2) 使用するにあたって、目的とする製品であることを確認すること。
- 3) 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止等に留意し安全な方法で処分すること。
- 4) 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- 5) あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、薬液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
- 6) ルアーキャップがはずれたり、緩んでいる場合は、確実に固定すること。
- 7) 押し子はまっすぐ引くこと。[斜めに引くと、ガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れ、空気混入又はガスケットの外れが生じる可能性がある。]

- 8) 外筒印刷部の目盛を越えて押し子を引かないこと。[押し子が外筒から抜けて液漏れ、空気混入が生じる可能性がある。]
- 9) ガスケットに針等で傷をつけないこと。[破損が生じ、液漏れ、空気混入及び摺動抵抗の増加が生じる可能性がある。]
- 10) 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないように、さらに、はさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。[液漏れ、空気混入や破損が生じる可能性がある。]
- 11) 外筒部を強く握る等、圧迫するような負荷を加えないこと。[圧迫によりガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れや空気混入が生じる可能性がある。]
- 12) コネクターを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[コネクターが外れなくなる又は、コネクターが破損、接続部からの液漏れ、空気混入を生じる可能性がある。]
- 13) 外筒印刷部をこすったり、あるいは薬液がついた状態で放置しないこと。[目盛等の印刷部が消える可能性がある。]
- 14) 運搬・操作時には、振動や衝撃に注意すること。
- 15) 低温下の衝撃で破損する危険があるため、低温時の取り扱いに注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
外箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】

25、50、100本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ株式会社