

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000

スベニール専用アダプター


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

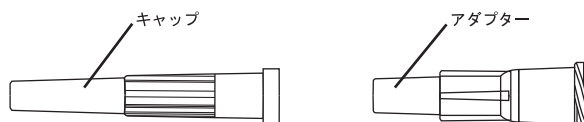

<材質>

アダプター：ポリカーボネート

【使用目的、効能又は効果】

筒先がルアーロックタイプの注射筒に接続し、他機器との接続を行う目的で使用する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出して下さい。
[注意]汚染を防ぐため、アダプターに直接手で触れないこと。
2. キャップ部分を手で持ち、アダプターを『スベニールディスプレイ関節注25mg』の先端部にしっかりと接続して下さい。
[注意]十分に嵌合していることを確認すること。
3. キャップを取り外して下さい。
4. 注射針に接続し薬液の注入を行って下さい。
[注意]接続の際には、無菌的管理を徹底すること。
[注意]十分に嵌合していることを確認した上で薬液の注入を行うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品は『スベニールディスプレイ関節注25mg』（製造販売：中外製薬株式会社）専用のアダプターであるので他品目には使用しないこと。
- 万一、包装が破損や汚損している場合、または、製品の破損等、異常がある場合は使用しないこと。
- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- 開封は使用直前に行うこと。
- アダプターを他機器に接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[アダプターが外れなくなる又は、アダプターが破損する可能性がある。]
- あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。[薬液注入時にアダプターの外れ、エアの混入等が発生する可能性がある。]
- アルコールを含む消毒剤を使用する場合は、アダプターのひび割れについて注意すること。[薬液によりアダプターにひび割れが生じ、薬液漏れ、エア混入等の可能性がある。なお、過度の締め付け及び繰り返しの締め付け等はひび割れの発生を助長する要因となる。]
- ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 使用後は、感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿をさけて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
外箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】

50本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ株式会社

お問い合わせ先
ニプロ株式会社 東京営業部
電話番号：03-5684-5611



ニプロ株式会社