

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000


スベニール専用アダプター

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

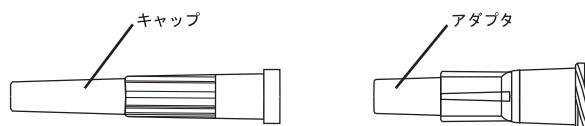

<材質>

アダプタ：ポリカーボネート

【使用目的、効能又は効果】

筒先がルアーロックタイプの注射筒に接続し、他機器との接続を行う目的で使用する。

* 【品目仕様等】

300kPaで水圧を30秒間加えた時、水漏れがない。また、注射筒を用いて15秒間陰圧にした時、空気漏れがない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出してください。
[注意] 汚染を防ぐため、アダプタに直接手で触れないでください。
2. キャップ部分を手持ち、アダプタを『スベニールディスポ関節注25mg』の先端部にしっかりと接続してください。
[注意] 十分に嵌合していることを確認してください。
3. キャップを取り外してください。
4. 注射針に接続し薬液の注入を行ってください。
[注意] 接続の際には、無菌的管理を徹底してください。
[注意] 十分に嵌合していることを確認した上で薬液の注入を行ってください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品は『スベニールディスポ関節注25mg』（製造販売：中外製薬株式会社）専用のアダプタであるので他品目には使用しないこと。
- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- 開封は使用直前に行うこと。
- アダプタを他機器に接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[アダプタが外れなくなる又は、アダプタが破損するおそれがある。]

- あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。[薬液注入時にアダプタの外れ、空気混入等が発生するおそれがある。]
- アルコールを含む消毒剤を使用する場合は、アダプタのひび割れについて注意すること。[薬液によりアダプタにひび割れが生じ、液漏れ、空気混入等の可能性がある。なお、過度な締め付け及び繰り返しの締め付け等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
- ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 使用後は感染防止に留意し、直ちに安全な方法で廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
外箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】

50本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ株式会社

お問い合わせ先

* ニプロ株式会社
東京都文京区本郷4丁目3番4号
電話番号：03-5684-5611



ニプロ株式会社