

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテル用クランプ JMDNコード16449000

ミルキングデバイス

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) カテーテルを手で保持せずにミルキングを行わないこと。[不意のカテーテル抜去につながるおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

本品はUKドレーンカテーテルをミルキングするための樹脂製のローラーである。二つのローラーでカテーテルを把持して閉鎖し、そのままカテーテルに沿って手前に引くと閉鎖部が移動し、カテーテルのミルキングができる。

〈形状・構造〉

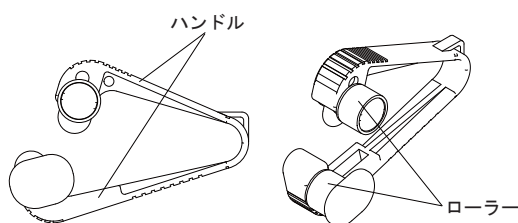

〈材質〉

ポリアセタール

〈製品仕様〉

商品名 ミルキングデバイス	適合カテーテル（サイズ）
UC-MD	UKドレーンカテーテル (10Fr、15Fr、19Fr)

【使用目的又は効果】

ドレーンカテーテルを圧迫して閉鎖し、ミルキングするための器具である。

【使用方法等】


1. 使用前点検を行います。
 - ①外観上、破損や汚れ、ひび等の異常がないか確認して下さい。特に、ローラーに傷や変形がないかよく確認して下さい。
 - ②二つのローラーが滑らかに回転すること、ハンドルがスムーズに開閉することを確認して下さい。

2. カテーテルのミルキングを行う位置よりやや患者側を指でつまんで閉鎖し、保持します。




3. 下図のようにハンドルを持ち、二つのローラーでカテーテルのミルキングを行う位置をはさみ、ハンドルを握ってカテーテルを閉鎖します。


●注意 左利きの方は、本品の上下を反対にして持って下さい。（指の置き部位も反対となります）

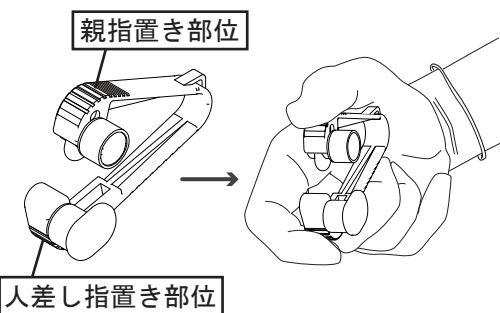

4. つまんだ指とローラーでカテーテルの二箇所をしっかりと閉鎖したまま、本品をカテーテルに沿って手前にゆっくりと滑らせます。

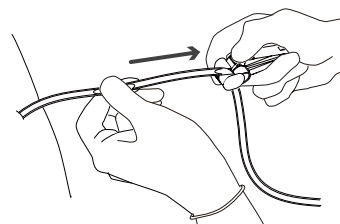

5. 伸びたカテーテルを元に戻し、指で閉鎖していたカテーテルの流路を開放して、カテーテルの患者側内腔を陰圧にします。

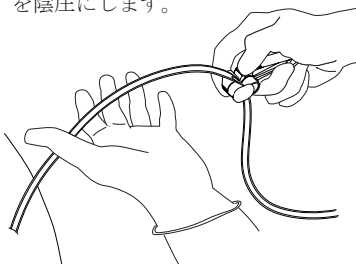

6. ハンドルを緩めて流路を開放します。
7. 2～6の操作を必要な回数繰り返します。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) カテーテルをローラー以外の箇所で挟まないこと。
- 2) ローラーが滑らかに回転しない等の違和感があった場合は、使用を中止すること。
- 3) カテーテルの破損につながるおそれがあるため、アルコール綿を併用してミルキングしないこと。
- 4) 交差感染のおそれがあるため、本品を複数の患者に使用しないこと。
- 5) 本品を洗淨しないこと。
- 6) 本品を再滅菌しないこと。

2. 不具合・有害事象

1) 不具合

- ・ローラーの破損
- ・カテーテルの破損

2) 有害事象

- ・交差感染

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2) 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。
有効期間：製造後5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（文献請求先も同じ）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社
