


機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000

トッテちゃん

【形状・構造及び原理等】

【形状】

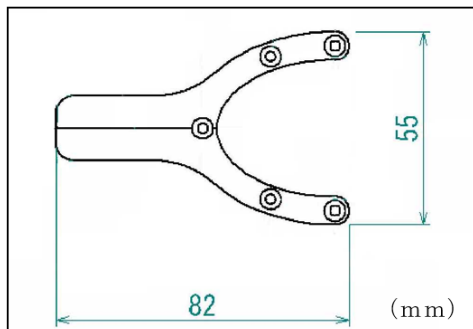

【外観写真】



【材料】

純チタン

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具の一部として使用。

【使用方法等】

【使用方法】

1. 常温重合レジン等でトレーのベースを作製



2. ベース上に咬合平面を想定しながら本品を取り付ける



3. 印象材をトレーに乗せ、印象の採得を行う
4. 石膏を注入し模型を作製する
5. 使用後は必ず洗浄、滅菌を行う

【使用上の注意】

1. 歯科医療有資格者以外が使用しないこと。
2. 記載の使用目的以外には使用しないこと。
3. 使用前に外観確認を行い、汚れ、腐食、損傷等の異常がない事を確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 高温・多湿を避け、清潔な場所で保管する。
2. 本品は、歯科の医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

和田精密歯研株式会社

大阪府大阪市東淀川区西淡路 5-7-16

取扱説明書を必ずご参照ください。