



DSフラスコ

【形状、構造及び原理等】


1) DSフラスコⅠ外観図

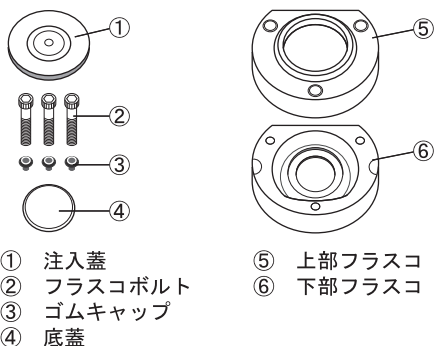

2) DSフラスコⅡ外観図

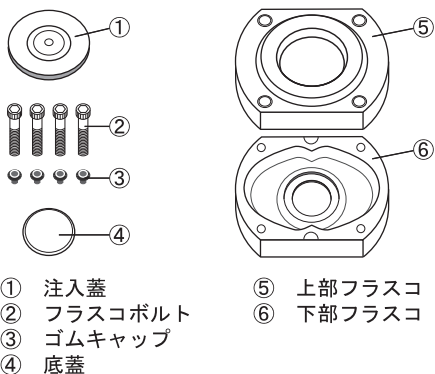

** 3) DSフラスコⅡ NEO 外観図

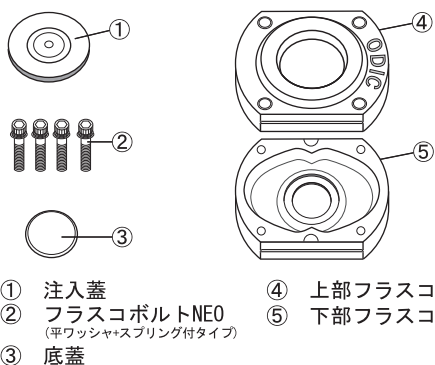

* 【使用目的又は効果】

重合用補綴物を成形する型を保持する容器をいう。

* 【使用方法等】

埋没用石膏を適切に計量・練和し、形成完了した蠟義歯を埋没する。
※詳細な操作方法につきましては、DSシステムに付属のDSガイドブックをご参照ください。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ・使用前には必ず、DSシステムに付属のDSガイドブックを一読すること。
- **・締め付け時に石こうズなどの異物が介在しないよう、清掃を徹底すること。
異物が混入するとネジ部の摩耗や破損が発生し、製品寿命を著しく短縮するおそれがある。
- **・電動工具による高速締め付けや過大トルクでの締め付けは行わないこと。
焼き付きや破損の原因となるため、弊社指定の電気式ドライバーをトルク10以下の低速で仮止め後、手作業でゆっくり本締めすること。
- ・本品は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

** 2) 対応ボルトについて

本品「DSフラスコシリーズ」は、モデルにより対応するフラスコボルトが異なるため、誤った組み合わせで使用しないこと。
誤使用は締結不良や破損の原因となるおそれがあるため、下表を確認のうえ、必ず対応ボルトを使用すること。

フラスコ名	対応ボルト名	備考
・DSフラスコⅠ ・DSフラスコⅠL	フラスコボルト	旧モデル用
・DSフラスコⅡ ・DSフラスコⅡL	フラスコボルト	旧モデル用
・DSフラスコⅡ NEO ・DSフラスコⅡL NEO	フラスコボルトNEO	新モデル用 (旧モデルとの互換性なし)

3) 重要な基本的注意

- ・本品を扱う際は、落下による破損と人体への影響を避けるため、平らで安定した場所で操作を行うこと。
- ・本品の破損につながるため、掘り出しの際は必要以上の衝撃を加えないこと。
- ・本品はDSシステム専用ですので、本品の破損と人体への影響を避けるため、DSシステム以外で使用しないこと。

* 【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

- ・本品は、傾斜、振動、衝撃を避けて保管すること。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オーディック株式会社

住 所：〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島7-14-20

大阪みづほビル内

電 話 番 号：06-6451-7385

受 付 時 間：9:00～17:00(土・日・祝を除く)

DSガイドブックを必ずご参照ください。