

DSセリオS


【警告】

- ・注入ピストン作動時は、手や異物を近付けないこと。
また、注入ピストンがゆるんだ状態で使用しないこと。
[けがや事故の原因になります]
- ・表示の仕様で使用する。また、本機のカバーやねじは外さないこと。[火災、感電、事故の原因になります]

【形状、構造及び原理等】

1)装置外観図

本体寸法：幅268×奥行310×高さ456mm
本体重量：28kg

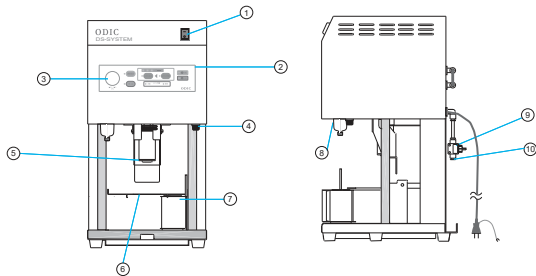

- | | |
|-----------|-----------|
| ①パワースイッチ | ⑥ガイドテーブル |
| ②操作パネル | ⑦レジン圧縮台 |
| ③圧力計 | ⑧エアフィルター |
| ④ヒューズボックス | ⑨メンテバルブ |
| ⑤注入ピストン | ⑩エアホース接続口 |

2)動作原理

- ・⑩に接続したホースから供給された圧縮空気を本体内部で所定圧に調整する。
- ・②の操作で所定圧を電氣的にコントロールし、⑤を作動させる。
- ・⑤の作動により、床用材料を圧縮または注入する。

3)仕様

定格電圧：AC100V 使用流体：空気(不活性ガス)
定格周波数：50/60Hz 最低必要圧力：0.55Mpa
定格消費電力：10W 最高必要圧力：1.0Mpa
周囲温度：-5～60℃(凍結なきこと)

*【使用目的又は効果】

歯科技工室で高分子材料を加圧注入で成型し、義歯床又は補綴物を作製する装置。

*【使用方法等】

1)設置方法、組立方法

- ・本機の取付、設置は、当社専門のスタッフまたは、当社指定業者が行う。
- ・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意し、設置すること。

2)使用方法

- 1.電源プラグを差込み、パワースイッチを押して電源を入れる。
- 2.餅状レ진을充填したレジン注入シリンダをレジン圧縮台に乗せる。
- 3.レジン圧縮のボタンを押す。
- 4.レジンの圧縮完了後、レジン圧縮台を外す。
- 5.フラスコをセットし、レジン注入ボタンを押す。
- 6.レジン注入完了後、フラスコを取出し、シリンダを外す。

7.パワースイッチを押し、電源を切る。

※本機の詳細な操作方法については、付属の取扱説明書とDSシステムに付属のDSガイドブックに記載しています。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・本機を扱う際は、落下による破損と人体への影響を避けるため、平らで安定した場所で操作を行うこと。
 - ・本機使用中は、電源プラグを抜かないこと。
 - ・本機使用中は、本体を動かしたり衝撃を加えたりしないこと。
 - ・本機はDSシステム専用ですので、本機の破損と人体への影響を避けるため、DSシステム専用器材以外は使用しないこと。
 - ・本機は、添付文書に記載の用途以外に使用しないこと。
 - ・本機は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- ※本機の詳細な注意事項については、付属の取扱説明書P2～P3に記載の「安全上のご注意」の項を使用前に必ず読むこと。

*【保管方法及び有効期限等】

1)貯蔵・保管方法

- ・本機は、湿度・ほこり・水のかからない場所に保管すること。
- ・本機は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

2)耐用期間

製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り、7年間(自己認証による)。

*【保守・点検に係る事項】

【使用者による保守点検事項】

毎回、使用前に付属の取扱説明書のP8～P9に記載の「日常の点検・お手入れ」の項を必ず読み、保守点検を行うこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オーディック株式会社

住所：〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島7-14-20

大阪みづほビル内

電話番号：06-6451-7385

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝を除く)

取扱説明書とDSガイドブックを必ずご参照ください。