

一般医療機器 類別:器 58 整形用機械器具
一般的名称:骨手術用器械 (JMDN コード:70962001)

骨接合プレート用手術器械

【禁忌・禁止】

- 本品について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1.形状等

本器械は、骨接合プレートを用いる骨接合術において使用する器械である。

(写真は製品の一例)



3.5 コーティカルスクリュー把持器



2.0/2.5 ペグ把持器



DVR レトラクター



鉗子型 DVR プレート把持器



グリップ型DVRプレート把持器



オーバルホール用 2.5MM ドリルガイド



DVR ティルト調整器



2.0MM スムースペグ抜き器



フィブラ骨把持鉗子



横骨プレート把持器



ロッキングスクリューホルダースリーブ




クロスロックデプスゲージ/*タワーデプスゲージ




横骨プレート固定鉗子




角度可変型肋骨用鉗子

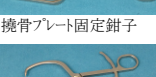


横骨プレートガイド鉗子

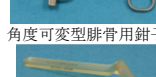

6.5 クリアスクリュースリーブ

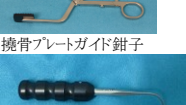


ラディオエレバ

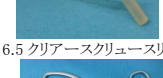

DVR ガイドフォースeps



DNCB-PH デプスゲージ

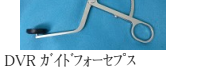

DRUJレトラクター



DRUJレトラクター

BC14-0191T-2	DVR ティルト調整器
BC14-0432T-1	2.0MM スムースペグ抜き器
BC15-0076T-1	オーバルホール用 2.5MM ドリルガイド
BC15-0056T-1	フィブラ骨把持鉗子
BC15-0209T-1	横骨プレート把持器
BC15-0277T-1	ロッキングスクリューホルダースリーブ
BC15-0278T-1	クロスロックデプスゲージ
BC15-0456T-1	横骨プレート固定鉗子
BC15-0425T-1	角度可変型肋骨用鉗子
BC16-0063T-1	角度可変型肋骨用鉗子
BC15-0421T-1	角度可変型肋骨用鉗子
BC16-0029T-1	横骨プレートガイド鉗子
BC16-0060T-1	
BC16-0186T-1	
BC16-0248T-1	
BC16-0249T-1	横骨プレートガイド鉗子
BC16-0178T-1	
BC16-0178T-1	
BC16-0178T-1	
SV-AT16-006-00	ラディオエレバ
SV-AT16-024-00	DVR ガイドフォースeps
SV-AT16-026-00	
SV-AT16-020-00	
SV-AT16-029-00	
SV-AT16-082-00	
SV-AT16-063-00	
SV-AT16-064-00	
SV-AT16-083-00	
SV-AT16-074-00	
SV-AT16-070-00	
SV-AT16-093-00	
SV-AT16-039-00	
SV-AT16-085-00	
SV-AT16-106-00	
SV-AT16-108-00	
SV-AT16-115-00	
SV-AT16-124-00	
*SV-AT21-010-00	
V-AT16-056-00	DNCB-PH デプスゲージ
SV-AT16-046-00	DRUJレトラクター
SV-AT16-127-00	DVR プレートフォースeps
SV-AT16-171-01	タワーデプスゲージ
*SV-AT17-091-00	*ドリルガイドフォースeps
**SV-AT22-005-00	**DVR フォースepsサポーター
**SV-AT22-019-00	

原材料:ステンレス鋼、ポリフェニルサルホン
(ステンレス鋼には、クロム及びニッケルが含まれている。)

2.原理

本器械を用いて、骨接合プレートの設置を行うことができる。

【使用目的又は効果】

本器械は再使用可能な手術器械であり、骨接合プレートを用いる骨接合術に用いる。

【使用方法等】

1.使用方法

- (1) 本品は未滅菌のため使用前に滅菌すること。【滅菌は保守・点検に係る事項】により行うこと。

製品番号	製品名
BC13-0400T-1	3.5 コーティカルスクリュー把持器
BC14-0002T-1	
BC14-0211T-2	
BC14-0211T-1	2.0/2.5 ペグ把持器
BC14-0161T-1	
BC14-0239T-1	
BC15-0021T-1	
BC15-0158T-1	
BC14-0079T-1	DVR レトラクター
BC14-0191T-1	鉗子型 DVR プレート把持器
BC15-0039T-1	グリップ型DVRプレート把持器

- (2) 使用方法
本器械を用いて、骨接合プレートの設置を行う。
- (3) 使用後は、【保守・点検に係る事項】により洗浄すること。

2.使用方法に関連する使用上の注意

- (1) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に、必要以上の力を加えないこと。
- (2) 滅菌前に、本品に損傷、変形等の異常がないことを点検すること。
- (3) 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- (4) 併用して使用する手術器械がある場合は、事前に組み合わせ、異常なく使用できることを確認すること。
- (5) 術者及び手術従事者は、使用前、使用中、使用後において本品の正常性を確認すること。
- (6) 使用後は直ちに点検し、破損、折損等が見つかった場合は破片が体内に遺残していないか調べ、遺残していた場合は、摘出等適切な処置を施すこと。
- (7) 磨耗粉が生じた場合は、速やかに洗浄し除去すること。
- (8) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液に浸漬すること。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- (1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚染物を除去し、感染防止のため洗浄・消毒すること。
- (2) 損傷・変形等がある器械は、識別した上で返却すること。
- (3) 滅菌は、正しく整備、校正された滅菌器を使用すること。
- (4) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ、使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。
- (5) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器械を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器械の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (6) 本品がクロイツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びその汚染が疑われる場合、破棄処分すること。

2.不具合・有害事象

本品の使用により起こり得る不具合・有害事象は以下のようなことがある。

- (1) 重大な不具合
破損、変形、摩耗等の不具合が現れた場合は、使用を中止し適切な処置を行うこと。
- (2) 重大な有害事象
以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。
 - 1) 感染
 - 2) 塞栓(脂肪、血液等)
 - 3) 骨折
 - 4) 過敏症
 - 5) 体内遺残
- (3) その他の有害事象
以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。
 - 1) 関節の亜脱臼又は脱臼
 - 2) 関節部の一過性または永続性の神経損傷
 - 3) 血管損傷

3.高齢者への適用

高齢者は、骨が粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後、緩み等が起きる可能性があるため、慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 水濡れおよび高温多湿を避け、室温にて保管すること。

保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検＞

- (1) 使用後は、分解が可能な器械は分解し、損傷がないかどうかを检查すること。
- (2) 洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。
- (3) 汚れた器械は 5 分間以上洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔

かいブラシを使用しスレッド部、隙間や継ぎ目などの洗浄しにくい箇所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。

- (4) 壊れやすい部分に気を付けて、曲げたり、器械の機能を損なわないようにブラシ等で洗浄すること。また、管状形状の器械は、柔らかいナイロンブラシ又はパイプクリーナーを使用し、その後異物等を取り除くこと。ブラシが届かない管内部は酵素洗浄液を満たして洗浄し、その後洗い流すこと。
- (5) 超音波洗浄により中性洗剤を用い 10 分間以上洗浄すること。また、ラチェット部等の可動部分は開放して、汚れが落ちやすいように、バスケットなどに収納すること。
- (6) 器械は温かい精製水(ろ過、蒸留水、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。全てのルーメン、内部、スライド機構、ヒンジは動かしながら洗い流すこと。
- (7) 最終洗浄後は、直ちに乾燥させること。できるだけフィルターを通した圧縮空気ですべての内部を乾燥させること。

＜滅菌方法＞

本器械は医療機関内において 10⁻⁶ 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。

・高圧蒸気滅菌の場合

サイクル: 前真空

温 度	時 間
121℃	20 分

(滅菌方法については、滅菌装置製造元の使用説明書に従うこと。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】株式会社フジフレックス

電話: 0743-72-0888