

* 2022年 6月改訂 (第2版)
2020年 8月作成 (第1版)

医療機器承認番号 30100BZX00256000

器51 医療用嚢管及び体液誘導管
管理医療機器 短期的使用胃瘻栄養チューブ 35419002

胃瘻バルーンカテーテル I (フィーディング・減圧チューブ ラージボア I 専用)

再使用禁止

【警告】

1. 使用方法

- 1) 本品はIS080369シリーズに規定されている小口径コネクタとは異なる設計の代替小口径コネクタであるため、他の代替小口径コネクタとの間で誤接続が起こる可能性があることに注意すること。

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、胃瘻バルーンカテーテル I (G B 胃瘻バルーンボタン ラージボア I) / 承認番号: 30100BZX00256000) 専用の、交換用フィーディング・減圧チューブである。
2. 本品には接続コネクタ形状の違いにより、次図に示すとおりストレート型、L字型の2種類の形状がある。なお、ストレート型にあつては、チューブ部分の短いショートタイプもある。

〈フィーディング・減圧チューブ〉

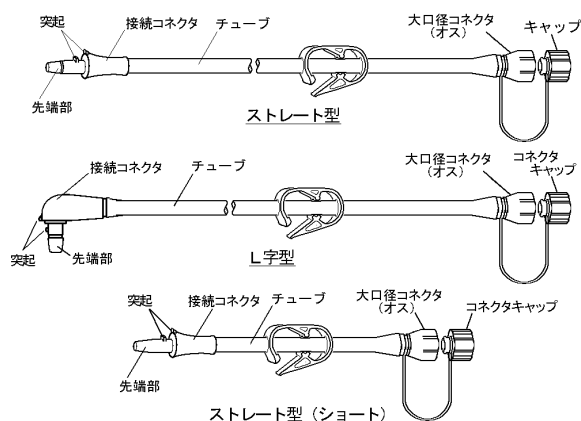

〈材質〉

各部の名称	原材料
チューブ	シリコンゴム
大口径コネクタ(オス)	ポリプロピレン
接続コネクタ	ポリエーテル

本品はラテックスフリーである。

〈原理〉

胃瘻孔に留置したG B胃瘻バルーンボタンに接続することで、胃に直接栄養投与が可能となる。栄養剤投与後に本品を取り外すことにより、G B胃瘻バルーンボタン自己抜去の危険性を低減する。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

胃に直接栄養剤等を投与するために、造設された胃瘻孔より胃に挿管して使用する。なお、本品は短期的使用を目的としている。

2. 本品の使用目的

本品は造設された胃瘻孔に留置したG B胃瘻バルーンボタンに接続し、栄養剤等の投与、或いは消化管の減圧に使用する。

【使用方法等】

1. 一般的使用方法

〈接続前の準備〉


- 1) 滅菌包装より丁寧に取出し破損等がないことを確認する。

〈接続方法〉


- 1) G B胃瘻バルーンボタン ラージボア I のファネルよりキャップを取り外す。

- 2) フィーディング・減圧チューブの接続コネクタ部ストッパを、バルーンボタン注入口の凹み部(凹み位置マーカ)に合わせて挿入した後、右に約3/4(回転限度マーカ(▲)まで)回転して接続する。その際、接続コネクタ部突起が回転限度マーカ(▲)を超えないように注意すること。[回転限度マーカを超えた過剰な右回しはストッパ破損の原因となる]

〈接続方法〉

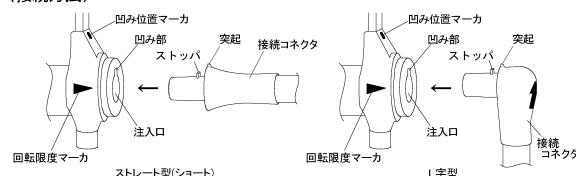

〈コネクタ接続位置〉

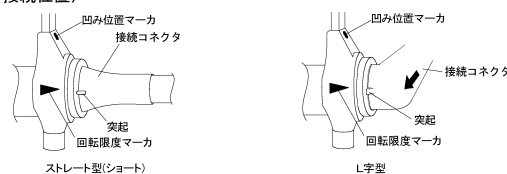

〈管理方法〉

- 1) 栄養剤等の投与前後、或いは消化管内の減圧後には、接続したフィーディング・減圧チューブより、適量の微温湯でG B胃瘻バルーンボタン ラージボア I の内腔をフラッシングする。
- 2) 栄養剤等の投与後は、フィーディング・減圧チューブの接続コネクタ部突起が凹み位置マーカに合うまで回して接続を解除した後、G B胃瘻バルーンボタン ラージボア I の注入口より取り外す。[取り外す際は、ボタン注入口と本品先端部の軸をずらさずに真っ直ぐに引き抜くこと。軸をずらして取り外すと、ボタン注入口破損の原因となる]
- 3) 取り外したフィーディング・減圧チューブは、洗浄及び消毒後、十分に乾燥させ、清潔な状態で保管する。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) G B胃瘻バルーンボタン ラージボア I の取扱いは、当該製品の手順に従うこと。
- 2) 刃物、鉗子、針等で傷を付けないように注意すること。[シリコンゴム製品は、傷が生じることにより強度が著しく低下するため、傷が生じると、破損の原因となる]
- * 3) クランプする際は、クランプに施されている溝の2段目以上(カチという音が2回以上するまで)閉じること。[クランプが緩いと、フィーディング・減圧チューブ内の内容物を遮断できないことがある]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品をG B胃瘻バルーンボタン ラージボア I に接続する際に、過剰な右回し(ロック)やロックされた状態で無理矢理取り外さないこと。[過剰な右回し(ロック)やロックを解除しないで無理に取り外すと、突起部破損やG B胃瘻バルーンボタン ラージボア I 注入口破損の原因となる](取扱いは【使用方法等】1. 一般的使用方法の〈接続方法〉の2)及び〈管理方法〉の2)を参照のこと)

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。

2. 有効期間

使用期限は製品ラベルに記載。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社
TEL 03-5689-1927