



【C-22-R2】

*2020 年 10 月（第 2 版）
2020 年 1 月（第 1 版）

認証番号:301ADBZX00017000

機械器具 25 医療用鏡
管理医療機器 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器（JMDN コード：38821002）

アースロスコピーキャニューラ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的な構成品


- 1) ツイストインキャニューラ

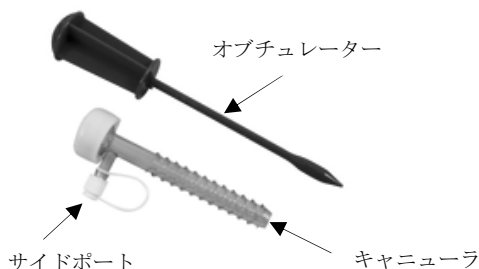

- 2) スモールインストルメントキャニューラ



- 3) シューホーンキャニューラ

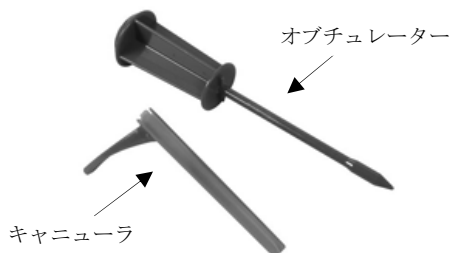

* 2. 組成

リニアポリエチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレン、シリコーン、ステンレス鋼、ABS 樹脂

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

創部等を拡張し、保持するために使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品の挿入位置を確保するため、予め適切な位置に皮切を加える。

1) ツイストインキャニューラ

- (1) 専用のオブチュレーターをキャニューラに装着し、時計方向に廻しながら関節内に留置する。
- (2) オブチュレーターをキャニューラから抜去し、関節鏡器具を挿入する。
- (3) 必要に応じ、キャニューラのサイドポートより灌流液を注入、または排出する。

2) スモールインストルメントキャニューラ

- (1) キャニューラを予め作製された創部開口部から関節内に留置する。
- (2) 関節鏡器具を挿入する。

3) シューホーンキャニューラ

- (1) 専用のオブチュレーターをキャニューラに装着し、関節内に留置する。
- (2) オブチュレーターをキャニューラから抜去し、関節鏡器具を挿入する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用後は直ちに破損等がないことを確認すること。破損等が確認された場合は、破損片が体内に遺残していないか確認し、遺残している場合は摘出等の適切な処置を行うこと。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
 - (1) 製品の破損
- 2) 重大な有害事象
 - (1) アレルギー反応・異物反応
 - (2) 感染症
 - (3) 軟骨・軟部組織損傷
 - (4) 体内遺残

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 包装にきずや破れが生じないように、取り扱い及び保管に注意すること。
- (2) 本品は高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

ラベルまたは包装に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：Arthrex Japan 合同会社

電話：03-4578-1000

製造元：アースレックス社(アメリカ合衆国)

Arthrex, Inc.



手術手技書を必ずご参照ください