

プログラム 1 疾病診断用プログラム  
管理医療機器 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム（70030012）

医療用画像処理ソフトウェア Holoeyes MD


【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞

本プログラムは、画像診断装置で得られた画像情報をコンピュータ処理し、診療のために提供するプログラムである。自動診断は行わない。画像表示を行う標準機能の他、三次元画像処理を行うオプション機能がある。  
本プログラムは汎用 IT 機器等にインストールして使用され、ダウンロードで提供される。

＜動作原理＞

画像診断装置または画像診断装置で撮影された画像情報を保管

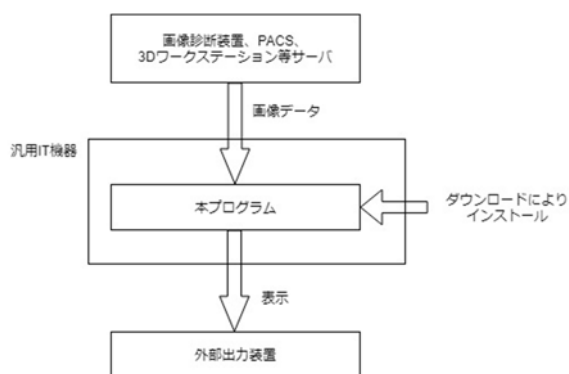

＜付帯機能＞

| 項目        | 機能                        |
|-----------|---------------------------|
| 三次元画像処理機能 | 一連の画像データを三次元画像処理し、表示する機能。 |

【使用目的又は効果】

画像診断装置等から提供された人体の画像情報をコンピュータ処理し、処理後の画像情報を診療のために提供する。本品は、自動診断機能は有さない。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 動作環境及び事前準備

本プログラムは下記の仕様を満たす汎用 IT 機器等に製造販売会社が指定した方法でインストールして使用する。汎用 IT 機器は、患者環境外に設置する。

汎用 IT 機器の仕様

CPU: Intel Core i7 Processors 以上

HDD: 128GB 以上

メモリー: 32GB 以上

OS: Windows 10 以降

安全性: JIS C 6950-1 適合

EMC: CISPR 22(または CISPR32) / CISPR 24、または VCCI 適合

外部出力装置の仕様

解像度 2880 × 1440 ピクセル以上

32bit 以上のカラー表示

2. 使用準備

インストール先の機器の電源を入れる。

本プログラムを起動する。

3. 操作

画像データを取得する。

機能を選択する。

画像表示等を行う。

4. 終了

画面上の終了アイコンをクリックするかあるいはメニュー項目から終了機能を選択し本プログラムを終了させる。

必要に応じて電源を切る。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 3D モデルをダウンロードする前には、必ず当該患者の ID をご確認ください。
- 事前に該当患者に対して適切な画像であることをご確認ください。
- 外部出力装置画面上の表示に乱れや抜けがないことをご確認ください。
- 3D モデルが表示される際に、何らかの事由により PC がハングアップした場合、PC の正常動作を確かめた後、再度 3D モデルのダウンロードしてください。
- 3D モデルが左右反転の状態で表示されていないことをご確認ください。
- 3D モデルの拡大縮小表示が実物と異なっていないことをご確認ください。
- 拡大表示の 3D モデルに近づきすぎると、表示されないことがあります。ご注意ください。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者・製造業者

Holoeyes 株式会社

東京都港区南青山二丁目17番3号モーリンビル3F

TEL: 050-3187-8097