

機械器具 55 医療用洗浄器
管理医療機器 腔洗浄器 (JMDN コード 32616000)

ウィズイン

再使用禁止

【警告】


- ・腔洗浄の目的以外では使用しない。
- ・他の医療機器と併用禁止。
- ・取扱説明書を必ず守る。

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・直射日光にさらす行為、及び加熱等
- ・使用期間の範囲を超える使用
- ・取扱説明書の範囲を超える使用

【形状・構造及び原理等】

本品を腔内に挿入し、ノズル内の洗浄液を腔腔に直接流入させ、腔内を洗浄することを目的とした機器である。* 洗浄液の内容量：1.7 g 公差+0.4g/−0.05g

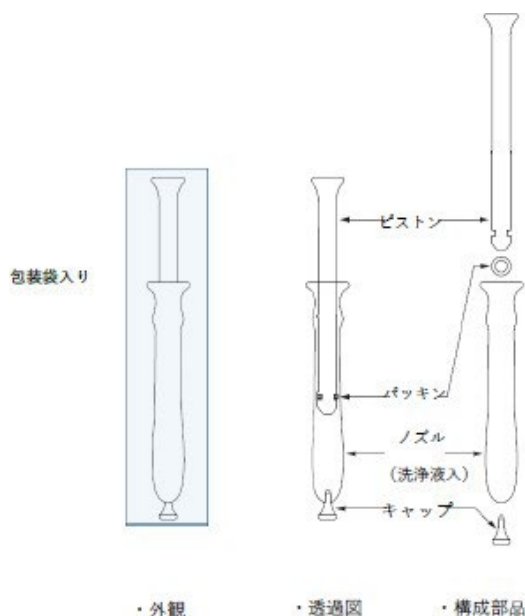


患者接触部分の原材料

- ・ノズル、ピストン (ポリプロピレン)
- ・キャップ (ポリエチレン)
- ・パッキン (シリコーンゴム)

・洗浄液 (精製水 (主剤)、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、プロパンジオール、乳酸、クエン酸 Na、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、EDTA-2Na、ヒアルロン酸 Na、コンドロイチン硫酸 Na)

・使用時の説明図

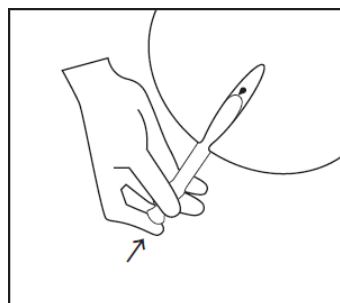


・キャップを外したノズルを図のように腔に挿入し、ピストンを押下すると洗浄液が出て、腔内を洗浄します。

【使用目的又は効果】

腔洗浄に用いる。

【使用方法等】

・手指を洗浄し、「OPEN」の印から袋を開封して本品の持ち手部分から取り出してください。
袋を開封後は直ちに使用してください。

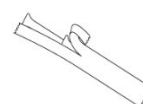

(1) キャップは真っ直ぐ引き抜いてください。




取扱説明書を必ずご参照ください。


(2) 容器の先端からゆっくり膣へ挿入してください。



(3) ゆっくりとピストンを押し、洗浄液を出してください。

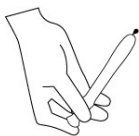

※挿入は矢印で示すふくらみの部分までにしてください。

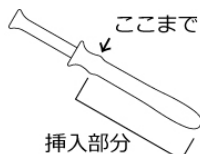

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：有限会社クサノハ化粧品

住 所：大阪府和泉市室堂町1 2 3 - 1

電 話：0725-57-7117

* 【包装】

1 本／袋

【使用上の注意】

- ・ 1 本 1 回限りの使い切りタイプの為、再使用禁止。
- ・ キャップを外したあとは、すぐに使用する。
- ・ 挿入は本品ノズルの膨らみ部分までとする。
- ・ 使用後は軽くふき取るか洗い流す。
- ・ 妊娠中や局部に炎症等の以上がある場合、使用前に医師に相談する。
- ・ 避妊フィルム等の殺精子剤を使用した後で、本品を使用しない。
- ・ 膣洗浄の目的以外で使用しない。
- ・ 使用中に異常が発生した場合、使用を中止し医師に相談する。使用後も症状が続く場合においても医師に相談する。

【保管方法及び有効期間等】

	包装袋開封前
有効期間	製造日より2年間 包装袋 EXP により使用期限表示 (西暦 4 桁, 月 2 桁, 日 2 桁)
保管方法	直射日光の当たらない屋内

【取り扱い上の注意】

本品及び梱包箱は落下等の衝撃を与えない。

取扱説明書を必ずご参照ください。