

機械器具 59 歯科用ユニット
管理医療機器 特定保守管理医療機器 (設置管理医療機器) 歯科用ユニット JMDN34991010

エクシード CL

【警告】

- ① 幼児・子供 (患者以外) を診療中の周辺及び本製品へ絶対に近づけないこと。
- ② チェアを作動させる時は、患者が正常の位置に座っていることを確認し、患者が機器に触れたり、各操作スイッチに触れたりしないように、常に患者から目を離さないこと。
- *③ 本製品の動作時は、本製品と周辺機器 (マイクロスコープ等) の接触および本製品と患者の意図しない接触がないことを常に確認すること。接触した場合、人体への怪我、无影灯の脱落、周辺機器を破損するおそれがある。
- ④ 診療の時は、患者の手を肘掛に置か、または腹上で組むように指導し、患者及び使用者の手・指・身体の一部を機器の可動部や周辺に近寄せないこと。
- ⑤ ガスパーナに布等の燃えやすいものを掛けないこと。予期せぬ出火が発生するおそれがあります。尚、ガスパーナに点火する時は、ガスパーナ付近に燃えやすいものがないか確認すること。
- ⑥ 智歯抜歯術等において、エアーターパーを使用すると皮下気腫等の偶発症が起きることがあるので注意すること。生じた場合は、それらの操作をただちに止め、適切な処置を行うこと。
- ⑦ 歯内療法等で根管内の乾燥目的などで、シリンジのエアーを使用すると皮下気腫等の偶発症が起きることがあるので注意すること。生じた場合は、それらの操作をただちに止め、適切な処置を行うこと。

【禁忌・禁止】

ペースメーカを使用している患者の近くで、超音波スケーラを作動させないこと。

【併用禁忌】


- ① 電磁波について
この医療機器は、電磁波によって誤動作を起こす可能性があるため、貴医院建屋内で、下記のような電気機器は、必ず電源を切るようにすること。
— 携帯電話、PHS、トランシーバー、ラジコンの送信機など—
- ② 本製品は、電気メスの影響を受ける可能性があるため、電気メスの使用時にはメインスイッチを切ること。
- ③ 診療区域で可燃性麻酔ガス使用中に、オートガスパーナを使用しないこと。両者の位置が離れていても、ガス爆発のおそれがあります。また可燃性麻酔ガス使用後も、まず十分換気を行って、診療区域の酸素濃度が通常の大気濃度レベルに復帰するまで、オートガスパーナの使用を控えること。

【形状・構造及び原理等】


1) 装置外形図

テーブル支持型式は 1 型、2 型、3 型があります。
チェア型式は、前折れ (ステップ) タイプ、前折れ (せり出し) タイプ、カンタータイプがあります。
(本製品に无影灯は含まれません。)

(代表例)

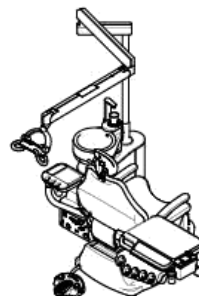

1 型 / 前折れ (せり出し) タイプ

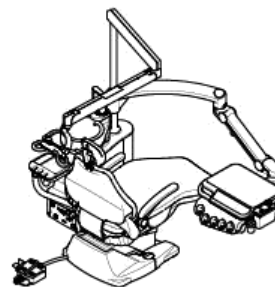

2 型 / カンタータイプ

2) 電気的定格

- ① 電源電圧 : AC100V
- ② 周波数 : 50Hz 又は 60Hz
- ③ 電源入力 : 1500VA

本製品は、EMC規格 IEC60601-1-2 Ed4:2014 に適合している。

3) 水、エア回路圧力定格

一次圧力 (許容範囲)	水	: 0.2 ~ 0.5MPa
	エア	: 0.56 ~ 0.60MPa
二次圧力 (最高)	水	: 0.2MPa
	エア	: 0.5MPa

4) 作動原理

圧縮空気、水、吸引力、電気を制御、供給し、歯科診療用機器、インスツルメント等を機能的に駆動させる。

【使用目的又は効果】

圧縮空気、水、吸引力、電気を歯科診療用機器に供給し、これを駆動すること。

【使用方法等】

- 1) 取付・設置 (組立て・据え付け)
 - ① 機器の取付・設置は専門の担当者 (当社又は当社指定の業者) が行って下さい。
 - ② 機器の詳細な取付・設置は付属の設置管理基準書に従って下さい。
- 2) 操作方法又は使用方法
機器の詳細な操作方法及び使用法は付属の取扱説明書の使用方法の項をご使用前に必ずお読みください。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

＜使用前準備＞

サプライBOXにある、給水元コック、空気元コックを OPEN の位置にし、サプライBOXにある電源スイッチを ON にしますと、装置全体が使用できる状態となります。

＜使用方法＞

各インスツルメントを取り上げ、フットコントローラ等にて作動させます。

＜使用後の処置＞

サプライBOXにあるドレンボタンを1秒以上押してから、給水元コック、空気元コックを CLOSE の位置にし、電源スイッチをOFFにし、使用を終了します。

【使用上の注意】

- ①本製品を使用しない時は、電源スイッチをOFF(表示:○)にし、給水元コック、空気元コック、ガスコック類を閉じてください。そのまま放置しますと火災、水漏れ、部品の寿命を縮めるなどのおそれがあります。
- ②アマルガム充填または撤去を行う際には、吸引源としてアマルガム分離機能を備えた吸引装置を用いること。
- ③詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項をお読みください。

●排唾管チップ(付属品)について

付属の排唾管チップは滅菌できません。ディスプレイ製品ですので、患者ごとに交換してください。

●シートへの色移りについて

患者が色物・柄物の衣類を着ている場合、チェアシートに染料の色移りが生じることがあるので注意すること。

*●チェアを作動させる際の注意事項

ネクストビジョン(ユニットマウントタイプ)搭載の場合、チェア作動時は、必ずネクストビジョンのアームを折りたたみ、チェアの可動域から外すこと。また、本製品のチェア上昇・下降に連動してネクストビジョンも上下するため、動作時にネクストビジョンの周囲に接触するような人や物がいないことを確認すること。

●医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項

1. 熟練した者以外は機器を使用しないこと。
2. 機器を設置するときには、次の事項に注意すること。
 - (1)水のかからない場所に設置すること。
 - (2)気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に設置すること。
 - (3)傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などの安定状態に注意すること。
 - (4)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
 - (5)電源の周波数と電圧及び許容電流値(又は消費電力)に注意すること。
 - (6)電池電源の状態(放電状態、極性など)を確認すること。
 - (7)アースを正しく接続すること。
3. 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - (1)スイッチの接触状況、極性、ダイヤル設定、メーター類などの点検を行い機器が正確に作動することを確認すること。
 - (2)アースが完全に接続されていることを確認すること。
 - (3)すべてのコードの接続が正確かつ完全であることを確認すること。
 - (4)機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこすおそれがあるので十分注意すること。
 - (5)患者に直接接続する外部回路を再点検すること。
 - (6)電池電源を確認すること。
4. 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - (1)診断、治療に必要な時間・量をこえないように注意すること。
 - (2)機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - (3)機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の動作を止めるなど適切な措置を講ずること。
 - (4)機器に患者がふれることのないように注意すること。

** (5) 光アレルギーなどの光線過敏症の患者に対しては、使用前に症状および原因となる光の種類(波長)について問診し、可視光に対して症状が出る場合はライトを使用しないでください。紫外線に対してのみ症状が出る場合でも、皮膚を遮光したり、照度を落としたり、必要な時以外は消灯することで、強い照射光が長時間当たらないように注意してください。症状

が発生した場合には直ちに使用を中止すること。

** (6) 白内障・網膜障害の既往者など光に敏感な患者に対しては、強い光が目に入らないよう、目隠しなどで適切に保護すること。

5. 機器の使用後は次の事項に注意すること。

- (1)定められた手順により操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻したのち、電源を切ること。
- (2)コード類のとりはずしに際してはコードを持って引抜くなどの無理な力をかけないこと。
- (3)保管場所については次の事項に注意すること。
 - i 水のかからない場所に保管すること。
 - ii 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - iii 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などの安定状態に注意すること。
 - iv 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- (4)付属品、コード、導子などは清浄にしたのち、整理してまとめておくこと。
- (5)機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。
6. 故障したときには勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家にまかせること。
7. 機器は改造しないこと。
8. 保守点検
 - (1)機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。
 - (2)しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 貯蔵・保管方法

- ①水のかからない場所に保管すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ③傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意すること。
- ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2) 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検を行なった場合に限り10年間とする。

【自己認証(当社データ)による。】

【保守・点検に係る事項】

詳細については、取扱説明書の保守点検の項をご使用前に必ずお読みください。

併せて、ユニットに付属される「歯科用ユニット等を使う人のための安全ノート」もご使用前に必ずお読みください。

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 暫く使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず装置が正常に且つ、安全に作動することを確認すること。
- 3) 取扱説明書の保守点検の項に従い、装置の点検及び手入れを行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 吉田製作所

お問い合わせ先

TEL: 03-3635-1686 (CS部)

FAX: 03-3635-8937 (CS部)

販売業者

株式会社ヨシダ

住所: 〒110-8507

東京都台東区上野7-6-9

TEL: 0800-170-5541(コンタクトセンター)

※携帯電話からは03-6880-2155におかけください。

文書番号 TA74-添付-04

取扱説明書を必ずご参照下さい。