

医療用品 04 整形用品
高度管理医療機器 眼内ドレーン(36099000)

プリザーフロ® マイクロシャント 緑内障ドレナージシステム コアキット

再使用禁止

Santen

【禁忌・禁止】

1. 適用対象(患者)

次の患者には使用しないこと

- (1) 閉塞隅角緑内障
- (2) 本品使用部位に結膜瘢痕、結膜切開手術歴、その他の結膜病変(結膜菲薄化、翼状片等)
- (3) 活動性虹彩血管新生
- (4) 眼部の活動性炎症(例：眼瞼炎、結膜炎、強膜炎、角膜炎、ぶどう膜炎)
- (5) 前房内硝子体脱出
- (6) 前房眼内レンズ
- (7) シリコンオイル注入眼


2. 使用方法

- (1) 再使用禁止
- (2) 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品には、プリザーフロ マイクロシャント(本体)以外に雑品としてマーカーが含まれる。本体は、チューブ部分及びフィン部分により構成される。本体は、スチレン-イソブチレン-スチレントリブロック共重合体製の緑内障フィルトレーションシャントであり、結膜下から前房内へ刺入留置することで、前房と眼外の人に人工的な房水流出路を作製し、眼圧の下降を可能とする。

＜本体の外観＞

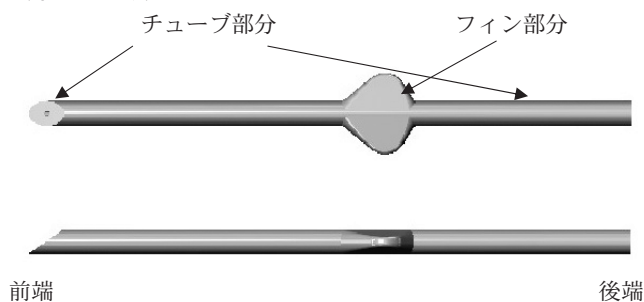

＜マーカーの外観＞



【使用目的又は効果】


薬物治療やレーザー治療などの治療法によっても十分な眼圧下降が得られない緑内障患者の眼圧下降に用いる。

【使用方法等】


〔組み合わせて使用する医療機器〕

本品はプリザーフロ マイクロシャント 緑内障ドレナージシステム アクセサリーキット(医療機器認証番号：303AIBZX00031000)と組み合わせて使用する。

- (1) 線維柱帯切除術の術式に準じて、結膜輪部の切開まで手順を進める。結膜及びテノン囊は輪部から8mm以上の深さで強膜から剥離する。

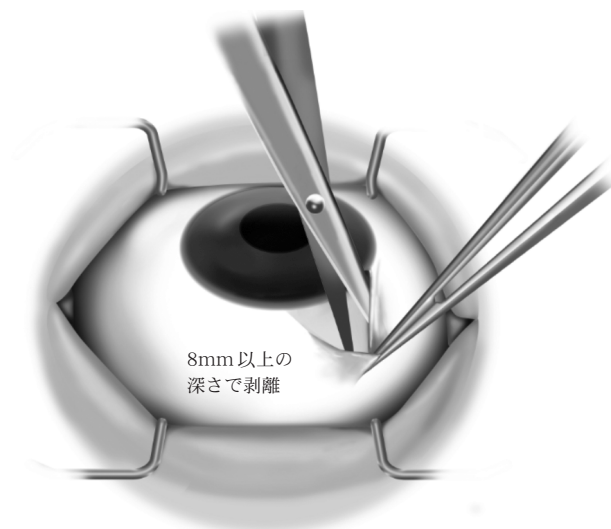


- (2) マーカーとマーカーペンを用いて、輪部から3mm離れた強膜上にマーキングを施す。

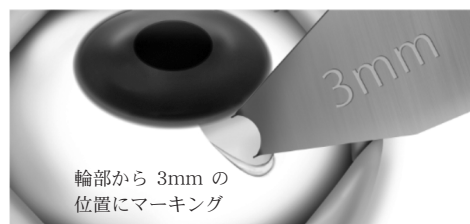

- (3) 強膜にマーキングした箇所からダブルステップナイフを刺入し、強膜浅層及び前房まで本体の挿入路を作製する。




取扱説明書を必ずご参照ください。

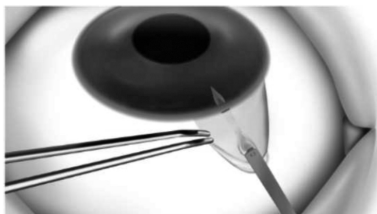


ダブルステップナイフのマーキングがある位置までを目安に刺し、ダブルステップナイフの先端が前房に到達していることを確認する


(4) マーキング箇所から本体を挿入路にそって挿入する。

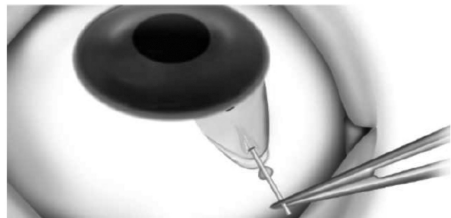

(5) 本体の先端が、角膜や虹彩に接触していないこと、及び本体のフィン部分が強膜に固定されていることを確認する。また、本体後端からの房水の流出を確認する(必要に応じて、スポンジを用いる)。本体後端からの房水の流出を確認できない場合、カニューレを用いて通水する。

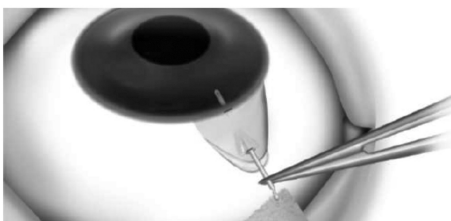


(6) 本体の後端をテノン嚢下に留置する。

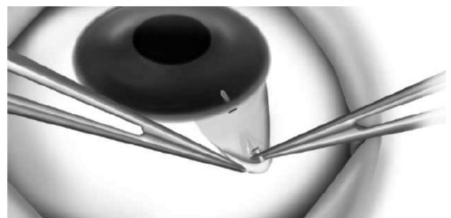

(7) 本体後端をテノン嚢に巻き込まないように留意し、テノン嚢及び結膜を輪部まで引き出し縫合を行う。

〈本体挿入断面図〉

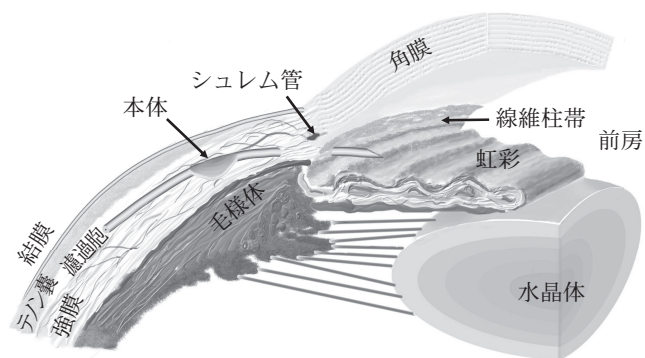

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- (1) 慢性炎症眼
- (2) 乳児期の先天緑内障
- (3) 血管新生緑内障
- (4) ぶどう膜炎緑内障
- (5) 落屑緑内障又は色素緑内障
- (6) 他の続発開放隅角緑内障
- (7) 切開を伴う緑内障手術又は毛様体破壊術既往眼
- (8) 白内障同時手術
- (9) 狭隅角眼

2. 重要な基本的注意

- (1) 本体を複数使用した場合の安全性と有効性は確立されていない。
- (2) 本体施術時の粘弾性物質の使用について検討されていない。
- (3) 術後は定期的に眼圧を確認する。
- (4) 本体をワセリンに直接接触させない。
- (5) 本体を再挿入、抜去、又は別のデバイスに変更する場合、結膜は輪部より切開する。本体を露出させ、再挿入又は抜去を行う。本体を抜去した場合は、挿入路からの水漏れがないことを確認する。テノン及び結膜の縫合を行う。
- (6) 本体を切断、変形して使用しないこと。
- (7) 手術開始前に本品が未開封であること、破損がないことを確認すること。

3. 不具合・有害事象

本体の挿入術に伴い、以下のような不具合・有害事象が発生することがある。

【不具合】

- (1) 本体の角膜・虹彩接触
- (2) 本体の露出
- (3) 本体の機能不全
- (4) 本体の偏位
- (5) 本体の閉塞
- (6) 本体の挿入不全

【有害事象】

- (1) 眼圧上昇
- (2) 低眼圧
- (3) 結膜下出血、前房出血
- (4) 白内障悪化
- (5) 視野悪化
- (6) 視力低下
- (7) 濾過胞障害(濾過胞漏出、囊胞状濾過胞、濾過胞被包、濾過胞炎)
- (8) 角膜障害(角膜浮腫、角膜擦過傷、角膜内皮細胞減少)
- (9) 霧視
- (10) 前房炎症(前房内細胞、フレア)
- (11) 眼の異物感
- (12) ドライアイ
- (13) 眼刺激、眼痛
- (14) 浅前房
- (15) 複視
- (16) 結膜障害(結膜充血、炎症、瘢痕)
- (17) 眼瞼下垂
- (18) 脈絡膜障害(脈絡膜滲出、脈絡膜出血、脈絡膜剥離)

取扱説明書を必ずご参照ください。

(19) 眼瞼炎

(20) 眼内炎

【臨床成績】

〈米国で実施された臨床試験〉

軽度から重度の原発開放隅角緑内障で、最大耐用量の緑内障治療薬で眼圧のコントロールが不十分で、かつ投薬時の眼圧が15mmHg以上、40mmHg以下である合計527例の被験者を、プリザーフロ マイクロシャント群(マイクロシャント群)又はトラベクレクトミー群(対照群)に無作為に3：1の比率で割り付け(マイクロシャント群：395例、対照群：132例)、術後24ヵ月まで追跡した。

有効性の主要評価項目は、「術後12ヵ月における平均日中眼圧がベースラインから20%以上下降し、かつ緑内障治療薬の数がスクリーニング時と比較して増加しない被験者の割合」とした。

安全性評価項目は、有害事象及び合併症、最高矯正視力、細隙灯顕検査、眼底検査、スベキュラーマイクロスコーピー検査、水晶体混濁等の所見とした。

有効性の主要評価項目は、マイクロシャント群及び対照群において、過半数(マイクロシャント群：54.7%、対照群：72.7%)の被験者で達成した。主要評価項目を用いた主要解析では、マイクロシャント群は対照群に非劣性を示せなかったものの、マイクロシャント群の平均眼圧は、ベースライン(スクリーニング来院時)の21.1mmHgから14.3mmHgへと約30%低下した。また、副次評価の術後介入の実施率は、マイクロシャント群が40.8%、対照群が67.4%であり、群間差は-26.7%(95%信頼区間：-37.6%、-15.7%)となり、対照群と比較してマイクロシャント群は低かった。

術後の主な有害事象は、治療を要した眼圧上昇(マイクロシャント群：56.2%、対照群：55.7%)、低眼圧(術後の一過性のものを含む)(マイクロシャント群：30.9%、対照群：51.1%)であった。マイクロシャント群の安全性プロファイルは、対照群と類似していたが低眼圧(術後の一過性のものを含む)(マイクロシャント群：30.9%、対照群：51.1%)、白内障進行(マイクロシャント群：14.2%、対照群：21.4%)、及び濾過胞漏出(マイクロシャント群：9.1%、対照群：14.5%)に関して、対照群と比較して、マイクロシャント群は低い発現率を示した。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、室温で保管すること。

【有効期間】

使用期限を外箱に6桁の数字で記載。

(上4桁は西暦、下2桁は月を示す。)

【承認条件】

本品を用いた治療に対する十分な知識・経験を有する医師が、適応を遵守し、講習の受講等により、本品の操作に関する十分な技能や手技に伴う合併症等に関する十分な知識を得た上で、本品が用いられるよう、必要な措置を講じること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

参天製薬株式会社

【お問い合わせ先】

参天製薬株式会社 製品情報センター

電話：0120-998-598 06-7664-8625

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

【製造業者】

InnFocus, Inc.

インフォーカス インク

アメリカ合衆国