

類別：機械器具 3 6 医療用ピンセット
管理医療機器 一般的名称：単回使用眼科用ピンセット
JMDNコード：1 6 2 0 9 0 0 2

販売名：**マニーマイクロ鑷子**

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 本品を再滅菌・再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


* 1. 形状及び寸法

【例示】

スリムグリップ

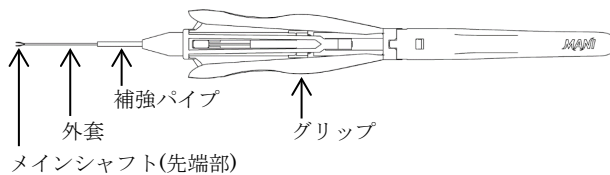

ワイドグリップ

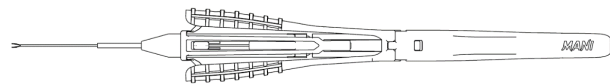

ゲージサイズ : 25G
27G

メインシャフト先端から補強パイプ先端までの長さ
: 最小露出時 17±1 mm, 最大露出時 28±1 mm
最小露出時 22±1 mm, 最大露出時 33±1 mm

メインシャフトの種類 : スクエアタイプ
ラウンドタイプ
** ILMタイプ

各製品のサイズや形状については個装及び外箱を参照

2. 原材料

メインシャフト：ステンレス鋼（ニッケル・クロム含有）
外套：ステンレス鋼（ニッケル・クロム含有）
補強パイプ：ステンレス鋼（ニッケル・クロム含有）
グリップ：ポリアセタール

3. 原理

グリップを握ると外套が摺動し、メインシャフトの一部が外套内に収納され、メインシャフト先端部が閉じる。グリップにかける荷重量により外套の摺動量を調整し、メインシャフト先端部を開閉することで、眼組織及び周辺組織の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、医療用の単回使用眼科用ピンセットとして用いる。

【使用方法等】

1. 包装を手で開封し、メインシャフトが破損しないよう慎重に、無菌の状態を取り出す。
2. グリップの開閉操作を行うことでメインシャフト先端部を開閉させ、眼組織及び周辺組織の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合を行う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 先端部及び外套は、折損、曲り等の可能性があるため、必要以上の荷重を加えないこと。
2. 滑らかな動作を維持するために、剥離した組織が絡み付いた際は、速やかに取り除くこと。
3. 硝子体カッター等、本品を破損させる恐れのある機器との接触を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管すること。
2. 使用期限
適切な方法で保管した場合の使用期限は、個装及び外箱ラベルに記載。〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

マニー株式会社
〒321-3231
栃木県宇都宮市清原工業団地 8 番 3

問合せ・連絡先
028-667-9911（営業）