



* 2 0 1 - 1 2 0 *

2024年 1月 (第1版)

認証番号 305ADBZX000950000

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 空気・酸素マスク (35171000)

メドライン中濃度酸素マスク

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止、滅菌禁止
- 火気のある場所及び発火の恐れのあるものの近くでは本品を使用しないこと。[火災発生及び火傷のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】


<形状、構造等>

本品は、患者の気道に酸素を供給するために使用される。患者の鼻と口を覆う様に設置し、酸素チューブから供給される酸素、マスクの換気孔からの空気及び、マスク内に貯留しているガスを吸入することで、中濃度の酸素を供給する。

本品は、成人用及び小児用があり、それぞれサイズはロング及びショートがある。

	サイズ
成人用	ロング
	ショート
小児用	ロング
	ショート

<各部の名称>

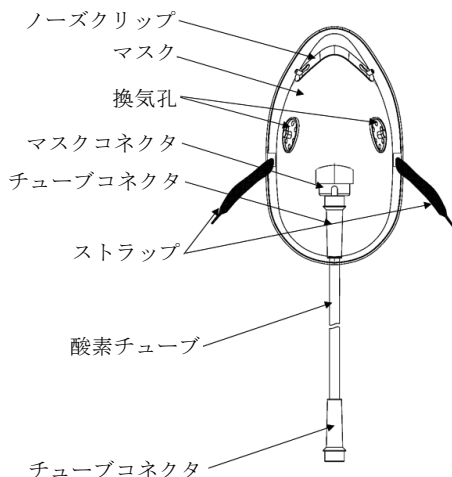

<原理>

マスクにより患者の鼻及び口を覆い、酸素供給源から供給される酸素を患者に供給する。

本品は、患者が呼吸する吸気量より低い流量で、酸素を供給する低流量酸素マスクであり、不足する吸気量はマスク上の換気孔からのマスク外の空気により補う。これらの空気と酸素をマスク内で混合することで中濃度の酸素を患者に供給する。

<材質>

患者に常時接触する部分の原材料を以下に示す。

マスク：塩化ビニル

ストラップ：スパンデックス

※塩化ビニルはDEHP不使用

【使用目的又は効果】

本品は、患者の気道に空気・酸素ガスを供給するために用いる。

【使用方法等】

- 酸素チューブを酸素供給源に接続し、処方された酸素流量に設定する。必要に応じて酸素チューブをマスクに取り付ける。
- 本品にガスが流れていることを確認する。
- ストラップを耳の下から首にかけて、マスクを患者の顔に装着する。
- マスクがしっかりと固定されるまで、ストラップの両端をゆっくりと引っ張る。
- ノーズクリップを鼻筋にフィットするように成形し、マスクを顔に密着させる。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 患者の顔に取り付けた後、過剰な圧力をかけないこと。[顔面神経及び視神経損傷又は皮膚が壊死するおそれがある。]
 - 使用前、及び使用中は、各接続箇所において抜けや緩み、その他の異常がないかを確認すること。[当該箇所が適切に接続されていない場合、リーク発生等による患者の呼吸困難を引き起こす可能性がある。]
 - 本製品内の酸素チューブは中濃度マスクの付属品であるため、他の目的へは使用しないでください [事故の原因になる可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れ、高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

メドライン・ジャパン合同会社

電話：(03) 5842-8800

製造業者：

ニンボー シェンギユリ メディカル アプライアンスズ
(中国)

Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd.