

歯科材料（04）歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント JMDN コード：31872000

再使用禁止


S A N I ガッタパーチャポイント

【禁忌・禁止】

1. 本品に含まれる原材料に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

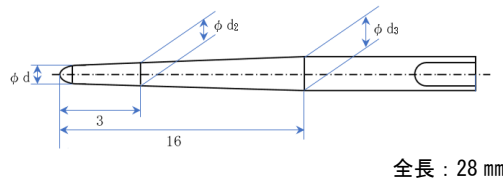

1) 標準ポイント 0.02 テーパー

表示番号	φd	φd ₂	φd ₃	色
015	0.15	0.21	0.47	白
020	0.20	0.26	0.52	黄
025	0.25	0.31	0.57	赤
030	0.30	0.36	0.62	青
035	0.35	0.41	0.67	緑
040	0.40	0.46	0.72	黒
045	0.45	0.51	0.77	白
050	0.50	0.56	0.82	黄
055	0.55	0.61	0.87	赤
060	0.60	0.66	0.92	青
070	0.70	0.76	1.02	緑
080	0.80	0.86	1.12	黒
090	0.90	0.96	1.22	白
100	1.00	1.06	1.32	黄
110	1.10	1.16	1.42	赤
120	1.20	1.26	1.52	青
130	1.30	1.36	1.62	緑
140	1.40	1.46	1.72	黒

2) 大テーパーポイント 0.04 テーパー

表示番号	φd	φd ₂	φd ₃	色
01504	0.15	0.27	0.79	白
02004	0.20	0.32	0.84	黄
02504	0.25	0.37	0.89	赤
03004	0.30	0.42	0.94	青
03504	0.35	0.47	0.99	緑
04004	0.40	0.52	1.04	黒
04504	0.45	0.57	1.09	白
05004	0.50	0.62	1.14	黄
05504	0.55	0.67	1.19	赤
06004	0.60	0.72	1.24	青
07004	0.70	0.82	1.34	緑
08004	0.80	0.92	1.44	黒

2) 大テーパーポイント 0.06 テーパー

表示番号	φd	φd ₂	φd ₃	色
01506	0.15	0.33	1.11	白
02006	0.20	0.38	1.16	黄
02506	0.25	0.43	1.21	赤
03006	0.30	0.48	1.26	青
03506	0.35	0.53	1.31	緑
04006	0.40	0.58	1.36	黒
04506	0.45	0.63	1.41	白
05006	0.50	0.68	1.46	黄
05506	0.55	0.73	1.51	赤
06006	0.60	0.78	1.56	青
07006	0.70	0.88	1.66	緑
08006	0.80	0.98	1.76	黒

寸法単位：mm

2. 原理

歯科用根管充填材をつけた本品を、形成された根管に挿入することにより、根管を封鎖する。

3. 原材料

酸化亜鉛、1,4-トランスポリイソプレン、硫酸バリウム、他

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 根管の形成後、通法に従い根管を洗浄し、乾燥させる。
2. 根管に適したサイズの本品を選択し、消毒する。
3. 本品に根管充填用シーラを塗布し、根管の先端まで挿入する。
4. 根幹に挿入した本品の周辺の隙間に、アクセサリポイントを必要分挿入し、スプレッターやブラガーで圧接しながら充填する。
5. 過熱したインストルメントを用いて、本品の余剰部分を除去する。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

- ・使用前に必ず消毒用エタノールで消毒すること。
- ・本品を高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌しないこと。
- ・湾曲度の大きい根幹では挿入時、側方加圧時に十分注意すること。
- ・本品を挿入する際は根尖を突出しないように十分注意すること。
- ・本品を口腔内での落下、誤飲しないよう十分に注意すること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により、発疹や皮膚炎等の過敏症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 劣化や異常が見られた場合は使用を中止すること。
3. 破棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体に従って適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 高温多湿を避け、直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、破損しないように注意すること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。
(使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd
(チェンドウ サニ メディカル エクイップメント社)
製造国：中華人民共和国