

BR ブリージングチューブ

【警告】

・使用前に呼吸回路の接続に誤りがないか、治療装置に接続し、漏れや閉塞がないか確認すること。[リークや閉塞により適切な換気が行えないおそれがある]

【禁忌・禁止】


<使用方法>

・本品は一人の患者のみに使用する。[本品は滅菌できない]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- (1) BR ブリージングチューブ $\phi 19 \times 1800\text{mm}$
(両端コネクタ 22 mm)

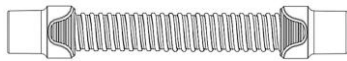

- (2) BR ブリージングチューブ $\phi 15 \times 1800\text{mm}$
(両端コネクタ 22 mm)



2. 原理

中空である呼吸管内にガスを通過させることによって、目的の場所へ送気する。

3. 仕様

長さ	1.8m
流量抵抗	(1) 0.06cmH ₂ O/L/min 以下 (@30L/min) (2) 0.12cmH ₂ O/L/min 以下 (@15L/min)
コンプライアンス	(1) 5mL/cmH ₂ O 以下 (@60±3cmH ₂ O) (2) 4mL/cmH ₂ O 以下 (@60±3cmH ₂ O)

【使用目的又は効果】

人工呼吸器 (CPAP 装置を含む) から患者への空気又は酸素を含むガスの送込に用いる。

【使用方法等】

- 使用前に破損等がないことを確認する。
- 全ての接続部がしっかり接続され、緩んでいないことを確認する。
- 人工呼吸器 (CPAP 装置を含む) が正しく作動することを確認する。

<洗浄・消毒方法>

- 中性洗剤を混ぜたぬるま湯で洗浄する。
- 清潔な水で十分にすすいだ後、自然乾燥させる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 併用する医療機器の添付文書、取扱説明書を熟読すること [併用使用する機器や器具の使用を誤ると患者の健康被害発生のおそれ]、[併用使用する機器や器具の使用を誤ると機器の故障や器具破損等の異常の発生のおそれ]
- 呼吸回路がねじれていないことを確認すること。[回路抵抗が高くなったり、換気がさえぎられるおそれ]

- 本品は使用直前に開梱し使用すること。[本品の汚染のおそれ]
- 使用前に本品及び全ての接続が正常であることを確認すること。[リーク発生のおそれ]
- 定期的に各接続部が接続していることを確認すること。[リーク発生のおそれ]
- 本品を滅菌したり、有機溶剤で洗浄したりしないこと。
- 記載された洗浄・消毒方法に基づき、初回使用前および毎回使用後に本品を洗浄・消毒をすること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 清潔な場所。
- 水のかからない場所。
- 直射日光の当たらない涼しい場所。
- 振動や衝撃が発生しない場所。
- 化学薬品の保管場所やガスが発生する場所には保管しないこと。

<保管条件>

温度: -20℃～55℃
湿度: 15%～90% (結露なし)

<使用期間>

- 本品の使用期間は 365 日を目安とする。
- 使用期間内であっても破損などの異常が認められた場合は新品と交換すること。

<有効期間>

梱包箱に記載。(自己認証 (自社データ) による)

【保守・点検に係る事項】

処分時は、医療産業廃棄物として各地域条例に従うこと。

<洗浄・消毒方法>

- 初回使用前および毎回使用後に本品を洗浄・消毒をすること。
- 中性洗剤を混ぜたぬるま湯で洗浄する。
- 清潔な水で十分にすすいだ後、自然乾燥させる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 Inspired Medical Japan

電話番号: 03-5817-8471

製造業者: Beijing Rongrui-Century Scie. & Tech. Co., Ltd.
(ペイジンロンルイ社)

製造国: 中華人民共和国