

機械器具74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000

アダプターFLL G (コンテナカバータイプ)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構成>

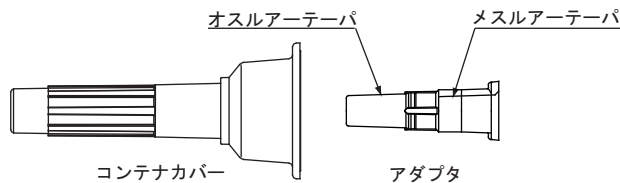

【使用目的、効能又は効果】

筒先がロック形状の注射筒に接続して、ニードルレス混注口に差し込む器具である。

*【操作方法又は使用方法等】

1. フィルムのふたを完全に剥がします。
2. コンテナカバーを手に持ち、アダプタを『エポジン注シリンジ』又は『ミルセラ注シリンジ』にしっかりと接続します。*
3. 本品の内部に薬液を満たします。
4. コンテナカバーを外し、アダプタを血液回路等の混注口に接続し、薬液を注入します。
5. 注入終了後、混注口から外します。

使用方法に関連する使用上の注意

- 『エポジン注シリンジ』又は『ミルセラ注シリンジ』と接続する際は次の事項を順守すること。*
- (1) 過度な締め付けや横方向への負荷を加えたり、コンテナカバーでアダプタに回転方向への過負荷をかけたりしないこと。[アダプタの破損により液漏れ、エアの混入が生じる可能性がある。]
- (2) 鉗子等で挟まないこと。[アダプタの破損により液漏れ、エアの混入が生じる可能性がある。]
- (3) 接続部に薬液等を付着させないこと。[接続部に緩みが生じる。]
- (4) 接続後は、漏れ等の異常がないことを確認すること。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品は中外製薬株式会社製『エポジン注シリンジ』及び『ミルセラ注シリンジ』専用であり、それ以外のものに使用しないこと。*
- 本品を『エポジン注シリンジ』又は『ミルセラ注シリンジ』に接続する前に、血液回路等に接続しないこと。[血液漏れ等が生じる。]*
- 血液回路等の混注口への接続及びその後の引き抜き時には、ねじらず、まっすぐ操作を行うこと。[ねじった場合は、シリンジとの接続部が緩み、血液漏れ等が生じる。]
- オスルアー部はロック構造となっていないため、注液中及び注液後は混注口に接続した状態で放置しないこと。
- 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が

認められる場合は使用しないこと。

2. その他の注意

- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 使用期限

- 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

100本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806