

器56 採血又は輸血用器具
一般医療機器 ルアーアダプタ 35075000

カテーテルジョイント

再使用禁止


【禁忌・禁止】

●再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、メスコネクタ、オスコネクタ及びキャップからなる。

＜構成＞

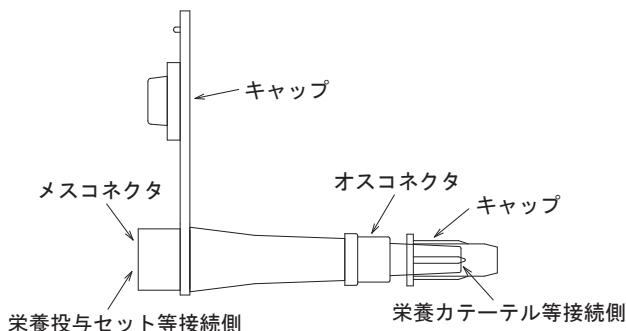

【使用目的、効能又は効果】

2つの器具を接続するために使用する単回使用器具。

【品目仕様等】

1. 引張強さ

栄養投与セット及び栄養カテーテル接続時、JIS T 3213の引張強さに適合する。

2. 漏れ試験

栄養投与セット及び栄養カテーテル接続時、JIS T 3213の漏れ試験に適合する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装から本品を取り出します。
2. メスコネクタに栄養投与セット等のオスコネクタを接続します。
3. オスコネクタのキャップを外し、ルアータイプの栄養カテーテル等に接続します。

使用方法に関連する使用上の注意

- 本品と注入器等との接続は外れないように確実に行うこと。なお、過度な締め付けをしないこと。[本品が外れない、破損する可能性がある。]
- 接続部に栄養剤等が付着した場合は、接続部に緩みが生じるので汚染に注意し、拭き取ってから接続すること。
- 横方向への力を加えないこと。[本品に曲がりや破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

(1) 外れ、破損

- キャップの外れに注意すること。[内圧の上昇等により外れる場合がある。]
- 包装を開封したらすぐに使用すること。

- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。

(2) 栄養剤の影響等

- 栄養剤等の添付文書を確認後、使用すること。
- 本品は経腸栄養用であり、血管系ラインへの接続はしないこと。
- 冷蔵保存等低温下での取り扱いに注意すること。[低温下では本品の耐衝撃性が低下しており強い衝撃を与えた場合、破損することがある。又、栄養剤等が固化し、先端等が詰まる場合がある。]
- 栄養剤等を投与した後は、微温湯等を流し、本品等の詰まりを防止すること。なお、詰まった場合は無理に詰まりを除去せず、新しい製品に交換する等の措置を行うこと。

2. その他の注意

- コネクタの先端部には直接手を触れないこと。
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（当社データ）により設定]

【包装】

25個入／箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806