

器48 注射筒

一般医療機器

汎用注射筒 13929001

JMSシリンジ カテーテルフィット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 造影剤等の高圧注入には使用しないこと。[液漏れ又は破損する可能性がある。]

【形状・構造及び原理等】

本品は、外筒、押し子、ガスケットからなる。

<構成>

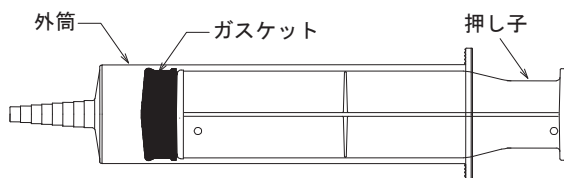

・公称容量：100mL

【使用目的、効能又は効果】

本品はカテーテル等に接続し、薬液等を注入するために用いる器具である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品を包装から取り出します。
2. 押し子を先端まで押し、外筒の空気を完全に押し出します。
3. 薬液を吸引します。
4. 先端にカテーテル等を接続し、薬液を注入します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- カテーテル等との接続の際は、次の事項を順守すること。
 - (1) 過度な締め付けをせず、横方向の力を加えないこと。[筒先の破損や液漏れ、エアの混入が生じる可能性がある。]
 - (2) 接続部に薬液等を付着させないこと。[接続部に緩みが生じる。]
 - (3) 確実にしっかりと接続し、漏れ等の異常がないことを確認すること。
- 押し子を引く際は次の事項を順守すること。
 - (1) 外筒印刷部の目盛以上に引かないこと。[押し子が外筒から抜け、液漏れが生じる可能性がある。]
 - (2) 押し子をまっすぐゆっくり引くこと。[強く引く、ねじりながら引いた場合は、外筒との密着性が低下し、液漏れやガスケットの外れが生じる可能性がある。]
- 外筒印刷部については次の事項を順守すること。
 - (1) 目盛を強くこすらないこと。[目盛が消える可能性がある。]
 - (2) 薬液等が付着した状態で放置しないこと。[目盛が剥離する可能性がある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 包装が破損及び汚損している場合や、製品に破損及び変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。

- 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]
 - 使用中は破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について確認すること。
 - 外筒部を強く握る等、圧迫するような力を加えないこと。[圧迫すると、ガスケットと外筒の密着性が悪くなり、液漏れ、エアの混入を生じる可能性がある。]
 - 冷蔵保存等低温下での取り扱いに注意すること。[低温下では本品の耐衝撃性が低下している。]
2. その他の注意
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（当社データ）により設定]

【包装】

25本入／箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806（添付文書請求先）