

一般医療機器

機械器具 74 医薬品注入器
採液針 70324000

プラスチックカニューラ

(バイアル用)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品は、人体への注射針又は穿刺針として使用しないこと。[人体に安全に穿刺できる構造ではない。]

【形状・構造及び原理等】

プラスチックカニューラ、カバーからなり、シリンジ等と接続できるメスルアーテーパを有する。

<構成>

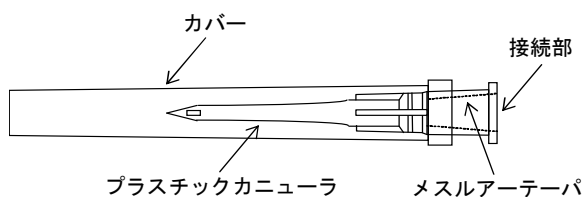

【使用目的、効能又は効果】

シリンジに取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために用いる採液針である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を開封します。
2. 本品のメスルアーテーパをシリンジ等しっかりと接続します。
3. カバーをまっすぐ引いて取外します。
4. 薬液を吸引します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- シリンジ等と接続する際は次の事項を順守すること。
 - (1) 接続部に対し過度な締めつけや横方向への負荷を加えたり、カバーで本品に回転方向への過負荷をかけたりしないこと。[本品の破損により液漏れ、エアの混入が生じる可能性がある。]
 - (2) 接続部に薬液等を付着させないこと。[接続部に緩みが生じる。]
 - (3) カバーを付けたまま接続すること。
 - (4) 確実にしっかりと接続し、漏れ等の異常がないことを確認すること。
- カバーを外す際は、先端部がカバーに接触しないように注意し、ねじる及び傾けて外さないこと。[シリンジから外れる、又は先端部を傷める可能性がある。]
- バイアルや薬液容器等のゴム栓に刺通する際は次の事項を順守すること。
 - (1) 本品を斜めに刺通したり、刺通中に横方向への力を加えたりしないこと。[変形や破損が生じる可能性がある。]
 - (2) ゴム栓への刺通はゆっくり、まっすぐ行い、同一箇所を繰り返し刺通しないこと。[刺通部分を削り、本品の内部に詰まりが生じる、又はゴム片等が混入する可能性がある。]

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 包装を開封したらすぐに使用すること。
 - 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
 - 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]

- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
 - 使用中はメスルアーテーパの接続部の緩み、液漏れ及び破損等注意到意し、定期的に確認すること。
 - 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を吸引する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、メスルアーテーパのひび割れについて注意すること。[薬液によりメスルアーテーパにひび割れが生じ、液漏れ等の可能性がある。なお、過度な締めつけ及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]*
 - ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。*
2. その他の注意
- 誤刺に注意すること。
 - 本品の先端部を直接手で触れないこと。
 - 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 使用期限
 - 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

100 本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元
株式会社ジェイ・エム・エス
広島市中区加古町 12 番 17 号
郵便番号：730-8652
電話番号：082-243-5806