

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 採液針 70324000

プラスチックカニューラ

再使用禁止

(バイアル用)


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

プラスチックカニューラ、キャップからなり、シリンジ等と接続できるメスルアーテーパーを有する。

<構成>

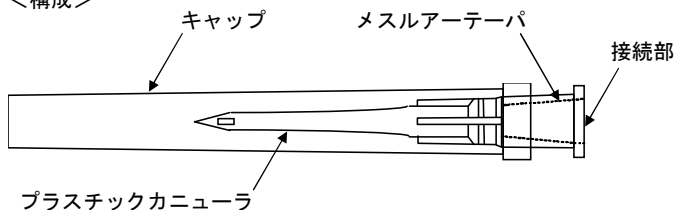

【使用目的又は効果】

シリンジ等に取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために用いる採液針である。

**【使用方法等】

**1. 組み合せて使用可能な薬液容器

** 本品は、バイアル内薬液の採液に使用します。

**2. 使用方法

(1) 包装から本品を取り出します。

** (2) 本品のメスルアーテーパーをシリンジ等に、緩みや外れが生じないようにしっかりと接続します。

(3) キャップをまっすぐ引いて取り外します。

** (4) 本品をバイアルのゴム栓に刺通し、薬液を吸引します。

使用方法等に関連する使用上の注意

**● シリンジ等と接続する際は次の事項を順守すること。

(1) 接続部に対し過度な締めつけや横方向への負荷を加えたりしないこと。[接続部の破損により液漏れ、エアの混入が生じる可能性がある。]

(2) 接続部に薬液等を付着させないこと。[接続部に緩みが生じる。]

(3) キャップを付けたまま接続すること。

** (4) 緩みや外れが生じないようにしっかりと接続し、漏れ等の異常がないことを確認すること。

**● キャップを外す際は、本品の先端部がカバーに接触しないように注意し、ねじる又は傾けるような力を加えないこと。[本品がシリンジ等から外れる、又は本品先端部を傷める可能性がある。]

**● バイアルのゴム栓に刺通する際は次の事項を順守すること。

(1) 本品を斜めに刺通したり、刺通中に横方向への力を加えたりしないこと。[変形や破損が生じる可能性がある。]

(2) ゴム栓への刺通はゆっくり、まっすぐ行い、同一箇所を繰り返し刺通しないこと。[刺通部分を削り、本品の内部に詰まりが生じる、又はゴム片等が混入する可能性がある。]

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]
- 使用中はメスルアーテーパーの接続部の緩み、液漏れ及び破損等に

注意し、定期的に確認すること。

*● 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を吸引する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、メスルアーテーパーのひび割れについて注意すること。[薬液によりメスルアーテーパーにひび割れが生じ、液漏れ等の可能性がある。なお、過度な締めつけ及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]

*● ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

2. その他の注意

- 誤刺に注意すること。
- 本品の先端部を直接手で触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

● 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 有効期間

● 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社ジェイ・エム・エス

電話番号：082-243-5806