

機械器具74 医薬品注入器

一般医療機器

注射筒・針用アダプタ 35384000

アクセスアダプタ

再使用禁止

(プリスターパック)

【禁忌・禁止】

●再使用禁止

●本品は、当社のニードルレスアクセスポートを含む以下の医療機器専用であり、他社、他仕様のニードルレスアクセスポートに接続しないこと。[血液又は薬液漏れ、エアの混入が生じる可能性がある。]

・プラネクタ(医療機器承認番号21100BZZ00335000)

・プラネクタを組み込んだ医療機器

・JMS人工腎臓用血液回路

(医療機器承認番号15900BZZ00364000)

・JMS人工腎臓用血液回路ST


(医療機器認証番号21800BZZ10097000)

・セーフミック TPNバッグ

(医療機器届出番号34B1X00001000057)

【形状・構造及び原理等】

＜構成＞

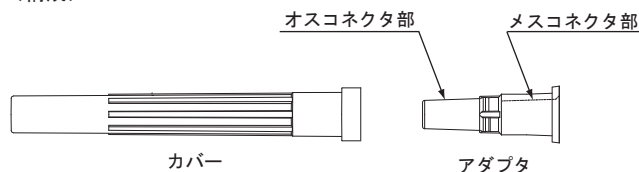

【使用目的、効能又は効果】

筒先がロック形状の注射筒に接続して、ニードルレスアクセスポートに差し込む器具である。

【品目仕様等】

メスコネクタ部を注射筒へ接続し、注射筒へ150kPaで15分間空気を送り込んだとき、接続部から空気漏れがない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装から本品を取出します。
2. 本品のメスコネクタ部を注射筒にしっかりと接続します。
3. 本品のオスコネクタ部先端まで薬液を満たします。
4. 接続するニードルレスアクセスポート及びキャップ部を消毒用アルコール綿等で消毒します。
5. 本品のカバーを外し、オスコネクタ部をニードルレスアクセスポートにまっすぐ押し込み、薬液を注入します。
6. 注入終了後、ニードルレスアクセスポートからまっすぐ本品を引き抜きます。

使用方法に関連する使用上の注意

- 本品を注射筒へ接続する際は、過度な締め付けや横方向への負荷を加えたりしないこと。[本品の破損により血液又は薬液漏れ、エアの混入が生じる可能性がある。]
- 接続部に薬液等を付着させないこと。[接続部に緩みが生じる。]
- 本品を注射筒へ接続した状態で、過度な負荷をかけないこと。[本品が外れる、及び接続が緩み薬液が漏れる可能性がある。]

- ニードルレスアクセスポートに接続及びその後の引き抜き時には、ねじらず、まっすぐ操作を行うこと。[ねじった場合は、注射筒との接続部が緩み、液漏れ等が生じる可能性がある。]
- 接続後は、漏れ等の異常がないことを確認すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- オスコネクタ部はロック構造となっていないため、注液中及び注液後はニードルレスアクセスポートに接続した状態で放置しないこと。
- 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。

2. その他の注意

- オスコネクタ部には直接手を触れないこと。
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 使用期限

- 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

100本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806