

機械器具74 医薬品注入器
一般医療機器 呼吸ガス混合器 36327009

レスピレーサー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品は個人の使用に限り、複数の患者には使用しないこと。
- 本品に使用する薬剤は、以下の医薬品（ドーズカウンター付メブチン定量噴霧式製剤）以外を使用しないこと。
 - ・販売名「メブチンエアー10 μ g吸入100回」（大塚製薬株式会社）（承認番号：22200AMX00289000）
 - ・販売名「メブチンキッドエアー5 μ g吸入100回」（大塚製薬株式会社）（承認番号：22200AMX00288000）
 - ・販売名「メブチン10 μ gエアー100吸入」（大塚製薬株式会社）（承認番号：22100AMX01805000）
 - ・販売名「メブチンキッド5 μ gエアー100吸入」（大塚製薬株式会社）（承認番号：22100AMX01804000）

【形状・構造及び原理等】

本品は、本体、ジョイントからなる。

<構成>

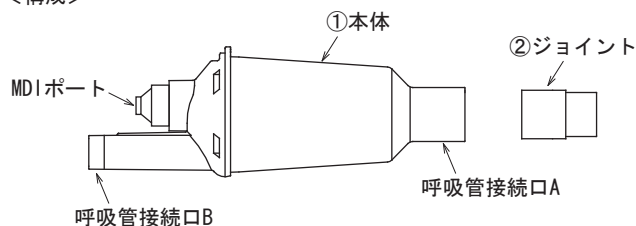


- ①本体：薬剤を噴霧する容器です。
- ・MDIポート：ドーズカウンター付メブチン定量噴霧式製剤（以下、MDI）の吸入器本体を差し込む部分です。
 - ・呼吸管接続口A：呼吸管（外径22mm）に接続します。
 - ・呼吸管接続口B：呼吸管（内径15mm）に接続します。
- ②ジョイント：呼吸管（内径22mmまたは外径15mm）に接続できます。

【使用目的、効能又は効果】

液体の医薬品をエアロゾルとして患者が吸入する空気の中に噴霧するために用いる機器をいう。通常、手で操作する。ネブライザーとは異なり、本品にはパッフルがないため、エアロゾルの粒子径が一定ではない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品の呼吸管接続口Aを直接、またはジョイントを用いて呼吸回路の患者側へ接続し、呼吸管接続口Bを同様に呼吸回路の装置側に接続します。
2. MDIのキャップと吸入口をはずします。（図1参照）

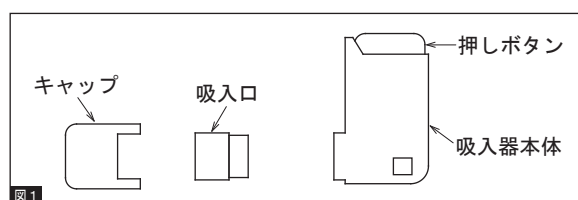

3. よく振った吸入器本体を押しボタンが上になるようにMDIポートにしっかりとセットします。
4. 全体の接続が完了したら、接続部の確認をします。
5. 医師の指示に基づき、定められた回数を噴霧します。

【使用上の注意】

- 本品を使用する前に、各接続部分がしっかりと接続されていることを確認すること。
- 本品に使用する医薬品は、医師の処方に従い、又使用方法について、医師の指示のもとに行うこと。
- 本品および包装に損傷又は異常が認められた場合には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
 - 保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。
2. 使用期限
 - 包装の使用期限欄を参照すること。〔自己認証（当社データ）により設定〕

【包装】

1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元
株式会社ジェイ・エム・エス
広島市中区加古町12番17号
郵便番号：730-8652
電話番号：082-243-5806

製造元
大連JMS医療器具有限公司
JMS DALIAN MEDICAL SUPPLY CO., LTD.
国名：中華人民共和国

販売
大塚製薬株式会社
東京都千代田区神田司町2-9
郵便番号：101-8535

（問い合わせ先）
大塚製薬株式会社 信頼性保証本部医薬情報センター
東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー
郵便番号：108-8242
電話番号：0120-189-840