

機械器具74 医薬品注入器

一般医療機器

呼吸ガス混合器 36327009

レスピレーサー

再使用禁止


*【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、本体、ジョイントからなる。

〈構成〉

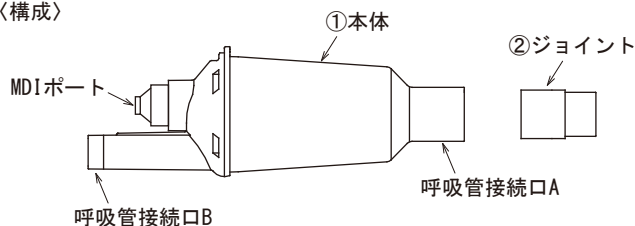

①本体：薬剤を噴霧する容器です。

- ・ MDI ポート：医薬品（ドーズカウンター付メプチン定量噴霧
式製剤（以下、MDI）の吸入器本体を差し込む部分です。
- ・ 呼吸管接続口 A：呼吸管（外径 22mm）に接続します。
- ・ 呼吸管接続口 B：呼吸管（内径 15mm）に接続します。

②ジョイント：呼吸管（内径 22mm又は外径 15mm）に接続できません。

・本品には以下の原材料を使用している。

構成部品	原材料
本体	ポリプロピレン、シリコーンゴム
ジョイント	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

液体の医薬品をエアロゾルとして患者が吸入する空気の中に噴霧するために用いる機器をいう。通常、手で操作する。ネブライザーとは異なり、本品にはパッフルがないため、エアロゾルの粒子径が一定ではない。

【使用方法等】


〈組み合わせて使用する医薬品〉

本品は、以下の医薬品に接続して使用します。

販売名	承認番号
メプチンエア-10 μ g吸入 100回	22200AMX00289000
メプチンキッドエア-5 μ g吸入 100回	22200AMX00288000

〈使用方法〉

1. 本品の呼吸管接続口 A を直接、又はジョイントを用いて呼吸回路の患者側へ接続し、呼吸管接続口 B を同様に呼吸回路の装置側に接続します。
2. MDIのキャップと吸入口をはずします。(図1参照)

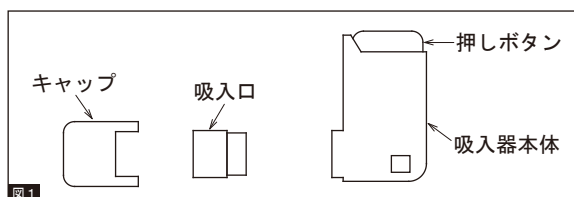

- よく振った吸入器本体を押しボタンが上になるように MDI ポートにセットします。
- 全体の接続が完了したら、接続部の確認をします。

5. 医師の指示に基づき、定められた回数を噴霧します。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

本品を使用する前に、各接続部分が緩みや外れが生じないように接続されていることを確認すること。

***【使用上の注意】**

〈その他の注意〉

本品は個人の使用に限り、複数の患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

5年「自己認証（当社データ）による」

包装の使用期限欄を参照すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

****電話番号：03-6404-0609（OEM営業部）**

販売業者

大塚製薬株式会社

(問い合わせ先)

*大塚製薬株式会社 医薬情報センター

電話番号：0120-189-840