


ジェイフィードENプロテクトアダプタ

【禁忌・禁止】
再使用禁止


〈構造図〉

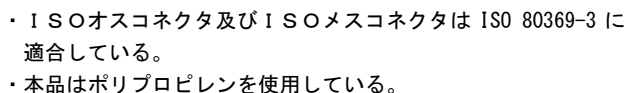


経腸栄養カテーテル等のオスコネクタに接続することで、オスコネクタのネジ部を栄養剤等の付着から保護するものである。

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して経腸栄養剤等を投与する器具である。

1. 包装のふたを剥がします。
2. 包装の外側から本品の把持部を持ち、本品のISOメスコネクタを栄養カテーテル等のISO 80369-3に適合したオスコネクタに緩みや外れが生じないようにしっかりと接続します(図1)。

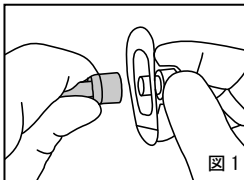

3. 包装を取り外します。
4. 本品のISOオスコネクタを、経腸栄養投与セット等のISO 80369-3に適合したメスコネクタに緩みや外れが生じないようにしっかりと接続します。
5. 栄養剤等の投与を開始します。
6. 投与後、本品の把持部を持ち、本品から経腸栄養投与セット等を取り外します(図2)。

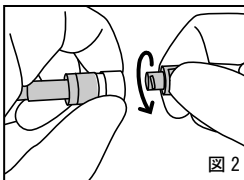

1. 他の医療機器を接続する際は、外れないように確実にすること。
また、過度なかん合をしないこと。[コネクタが外れない、又はコネクタが破損するおそれがある。]
2. コネクタのはめ合わせ部に栄養剤等が可能な限り付着しないように注意すること。[接続部に緩みが生じるおそれがある。]
3. 本品から経腸栄養セット等のISOメスコネクタを取り外す際は、本品の把持部を持つこと。[意図せず栄養カテーテル等が本品から外れるおそれがある。]

1. 使用中は次の事項に注意し、本品を定期的に確認すること。
 - (1) 本品が患者の下敷きになっていたり、ガートルスタンド等
に引っ掛かったりしていないこと。[接続の外れ又は構成品の破
損が生じるおそれがある。]
 - (2) コネクタの接続部の緩み、液漏れ、破損、閉塞及び空気混入
等の異常がないこと。
2. 粘度が高い又は不溶解物を含む栄養剤等を投与する場合、流量
の管理に注意すること。[詰まり等により、流量に変化が生じ
るおそれがある。]

空気混入、漏れ、固着、外れ、緩み、詰まり、破損

3年〔自己認証(当社データ)による〕
包装の使用期限欄を参照すること。

株式会社ジェイ・エム・エス

TEL 082-243-5806