

2021年 6月 25日 (新様式代2版)

2005年 12月 20日 (新様式第1版)

医療機器届出番号 34B2X00004000001

機械器具 80はり又きゅう用器具

一般医療機器

家庭用貼付型接触粒

JMDNコード 71026000

ギンリュウ


警 告

*記載なし

禁忌・禁 止

- *口腔や眼球には使用しないで下さい。
- *他の人が使用した金属粒は絶対使用しないで下さい。
- *製品を分解して使用しないで下さい。

形状、構造及び原理 (構成図)

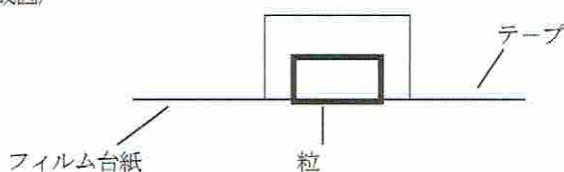

● 使用目的、効能又は効果

使用目的

鍼灸治療全般及び家庭用の貼付型接触粒として使用する。

効能又は効果

肩こり、筋肉痛、腰痛等コリからくる痛みの緩和。

● 品目仕様等

特定構成部品及び特定製造用物質

- ・使用するテープ類、粒はすべて一般用のものを使用する。
- ・特定構成部品及び特定製造用物質のないものを使用する。

● 操作方法又は使用方法

使用方法

- * 肩こり部位に1片をはがし1粒ずつ又は、部位に応じ5～6粒をおして痛い所に貼って下さい。
- * 入浴時もはがす必要はありません。
- * 3日位で貼り替えて下さい。

● 使用上の注意

- * 貼付箇所にカユミやカブレが生じた場合は早めに取り替えて下さい。特にカユミを生じた皮膚面を手指でかかないで下さい。
- * 皮膚の弱い人や顔面に貼る時は、7～8時間を限度に早めに貼り替えて下さい。
- * 万一効果が現れなかった場合は、医師又は鍼灸師等の専門家にご相談下さい。

● 貯蔵・保管方法及び使用期間等

貯蔵方法

- * 直射日光や高温多湿の場所での保管は避けて下さい。
- * 開封後は清潔な所に保管して下さい。
- * お子さまの手の届かない場所に保管して下さい。

● 有効期間

使用期限は外箱又は使用説明書に記載。

● 取扱い上の注意

取扱いに際しては、使用上の注意を参照下さい

● 包 装

品目・サイズはそれぞれの商品の個包装上に明記してあります。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

製造販売業者 大宝医科工業株式会社

住所 〒731-0211

広島市安佐北区三入1-25-9

電話番号 082-818-2511

製造業者 大宝医科工業株式会社