

機械器具 32 医療用吸引器

一般医療機器

吸引器用ボトル

JMDNコード 38476000

再使用禁止(チューブ付フィルタ)

キャニスター800

【禁忌・禁止】

- ◆ 本品は、複数の患者に使用しないでください[感染のリスクを避けるため]。

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

本体 : キャニスター800


付属品 : チューブ付フィルタ

2. 形状、寸法

キャニスター 800

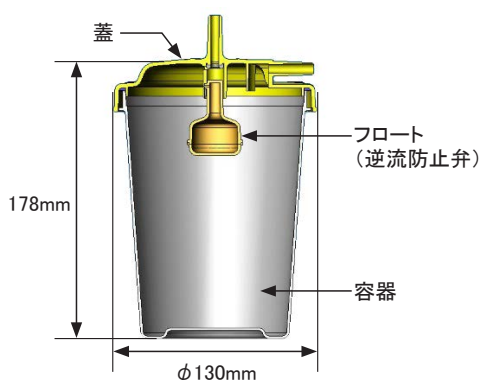

チューブ付フィルタ

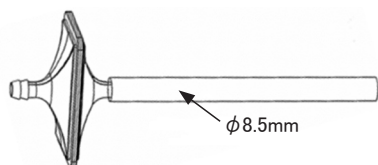

3. 作動原理

キャニスターの蓋に設けられたチューブ接続口(吸引器側)にはチューブ付フィルタを介して吸引器を接続し、チューブ接続口(患者側)には接続チューブを介して市販の吸引カテーテル又はヤンカーチップを接続する。

吸引器(本届出対象外)を作動させて、吸引カテーテル又はヤンカーチップにより洗浄液や患者の気道にある痰などの分泌物を吸引すると、これらの洗浄液や分泌物などの吸引物は接続チューブを経てチューブ接続口(患者側)から容器内に溜る。

チューブ付フィルタのフィルタは、疎水性の不織布で形成されており、容器内に吸引された洗浄液や分泌物などの吸引物が吸引器内に入るのを防止し、吸引器内のポンプが損傷するのを防いでいる。また、容器内の吸引物の量が800mlに近づくとフロートが吸引物によって持ち上げられて、吸引物の量が約800mlになるとフロートの上端部がチューブ接続口(吸引器側)の吸引穴を塞いで吸引器からの吸引を遮断し、チューブ接続口(吸引器側)から吸引器に向けて吸引物が流れ込むのを防止する。

4. 使用環境条件

温度 : 5~40℃

湿度 : 15~90%

【使用目的又は効果】

本品は、気道及び口腔内の分泌物を吸引する吸引器に使用するプラスチック製の吸引器用ボトルで、洗浄して適宜再使用することが出来る。

【使用方法等】

＜使用方法＞

- 1) 蓋の上部にあるチューブ接続口(吸引器側)に、チューブ付フィルタを介して吸引器を接続してください。
- 2) 蓋から水平につきでたチューブ接続口(患者側)に、市販の接続チューブを接続してください。
- 3) 市販の接続チューブに市販の吸引カテーテル又は市販のヤンカーチップを接続してください。
- 4) 吸引器を作動させることにより、洗浄液や患者の気道及び口腔内の分泌物などの吸引物が、市販の接続チューブを通りキャニスターに収集されます。


＜クリーニング＞

- 1) 吸引終了後、中性洗剤で汚れを落としてからきれいな水で洗浄し乾燥させてください。
- 2) 必要な場合はヒビテン液で消毒してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ◆ 本体が以下の場合、新品に交換してください。
- 容器に破損又はヒビが認められた場合。
 - フロートが上下動作しにくくなった場合。
 - 蓋のパッキングが弱くなった場合。

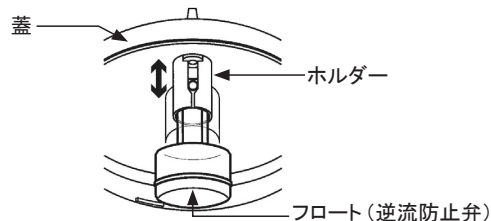

- ◆ チューブ付フィルタが次の場合、新品に交換してください。
- 破損や汚れ又は表面に水滴が認められた場合。
 - 目詰まりして吸引圧が低下した場合。
- ◆ フロートはホルダーから抜いて洗浄してください。
- ◆ 蓋と容器は矢印が合わさる位置まできつくネジ込んでください。
- ◆ 蓋の接続箇所にも漏れがないことを確認してください。
- ◆ 交換用として、必ず予備用の新品を保管しておいてください。

【保管方法及び有効期間等】

＜輸送及び保管環境条件＞

温度 : -20~40℃

湿度 : 15~90%

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称 : アイ・エム・アイ株式会社

製造業者名(国名) : Vincent Medical (Dong Guan)

Manufacturing Co., Ltd.

(ビンセントメディカル(ドングアン))

マニファクチャリング社(中国)