

機械器具 06 呼吸補助器

管理医療機器

呼吸回路セット JMDNコード 70566000

再使用禁止

ディスポ呼吸回路 410 (CV/ ベアー 1000/ バード 6400 用)

【警告】

＜使用方法＞

- ※ ※ ◆呼吸回路の中に溜まった水は回路外に捨ててください[回路閉塞等により適正な換気が維持されない恐れがあり、また、患者さんに水が入ると気道閉塞、人工呼吸器に水が入ると故障につながる恐れもあります]。

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ※ ※ ◆再使用しないでください[本品は単回使用向けのため]。
※ ※ ◆消毒・滅菌処理しないでください[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があります]。
※ ※ ◆温度ポートにはF&P社製以外の気道温度計及び温度プローブを使用しないでください[他社製品では、温度プローブのセンサ部が呼吸回路から外れ、リークの発生する可能性があります]。
※ ※ ◆ネプライザを使用される際に、呼気側回路へのフィルタ装着はお止めください[目詰まりにより、患者さんに重篤な障害を起こす可能性があります]。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

呼吸回路、添付文書

2. パーツの名称と材質

図中 番号	名称	材質	数量
1	エルボ	PPR1510	1
2	テーパ蛇管 6" 15mm/22mm	PE&EVA	1
3	Y ピース (温度ポート 2 個付)	PPR1510	1
4	温度ポートキャップ、VM	LLDE2034G	3
5	アウトレットコネクタ	LLDE2034G	8
6	蛇管22mm×6" (青)	PE&EVA	1
7	Tコネクタ	N/A	1
8	ストレートアダプタ22mmオス×15mm×22mmオス	PPJ750	2
9	PVC チューブ (外径 8mm、内径 5.5mm、長さ 82") (透明)	PVC	1

10	アウトレットコネクタ(温度ポート付)	LLDE2034G	1
11	蛇管22mm×36" (青)	PE&EVA	1
12	ウォータトラップ	PP	2
13	蛇管22mm×12" (青)	PE&EVA	1
14	蛇管22mm×36" (透明)	PP	1
15	90° 22mmメスコネクタ	N/A	1
16	蛇管22mm×24" (透明)	PE&EVA	1
17	PVC チューブ (外径 9mm、内径 6mm、長さ 1.5") (透明)	PVC	1
18	PVC チューブ (外径 6mm、内径 4mm、長さ 72") (透明)	PVC	1
19	モニタージョイント	PPJ750	1
20	チューブクリップ	PPJ750	3
21	チューブハンガー	PPJ750	1
22	ネプライザ	N/A	1
23	蛇管22mm×24" (青)	PE&EVA	1

3. 原理

併用する人工呼吸器の制御によって、呼気弁が開閉し、人工呼吸器からのガスが患者さんに送られます。

【使用目的又は効果】

人工呼吸器に接続し、呼吸管理に用います。


【使用方法等】

1. 取扱い方法

- ※ ※ 1) 図に従い、指定の人工呼吸器、加温加湿器に接続してください。
2) 患者さんに接続する前に、全ての接続部分に損傷・変形などの異常がないこと、呼吸回路を加圧してリークや閉塞のないことを確かめてください。
※ ※ 3) 併用する人工呼吸器の取扱説明書に従って、使用前の点検と使用中の点検を行い、異常のないことを確認してください。
4) 使用後は廃棄してください。

2. 使用対象機種

CV3000 人工呼吸器 (新呼気弁仕様)、CV4000 長期人工呼吸器 (新呼気弁仕様)、CV4000 α 長期人工呼吸器、CV5000 長期人工呼吸器、ベアー1000 長期人工呼吸器、バード6400 長期人工呼吸器

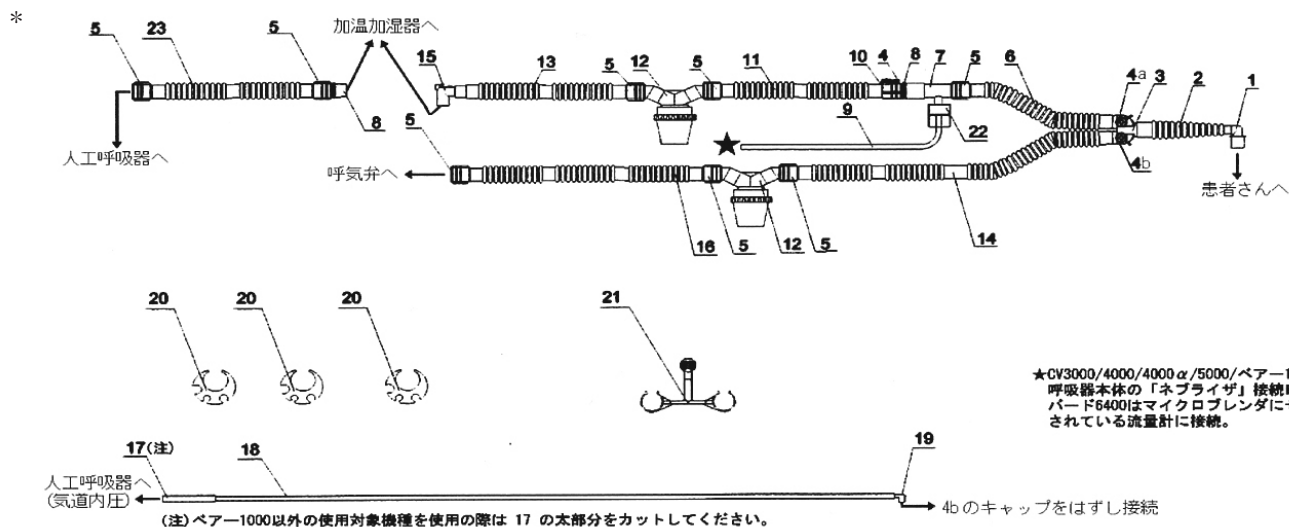

3. 使用中の点検

- ◆呼吸回路のチューブやコネクタ類がしっかり接続されており、ひび割れや破損がなく、リークがないことを確認してください。
- ◆院内の感染防止規定に則り、定期的に交換してください。
- ** ◆呼吸弁付近の水抜きは、患者さんから呼吸回路をはずして実施してください。
- ◆呼吸弁が正常に作動していることを確認してください。
- ** ◆患者さんの胸の動きと気道内圧インジケータを見て、設定通りの換気動作が行われていることを確認してください。
- ◆異常な動作音や異臭がないことを確認してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ◆気道内圧チューブに水滴が流入しないよう、チューブの差込口が常に上になるように設置してください。
- ◆気道内圧チューブに水滴が見られた場合には速やかに取り除いてください[水滴で、チューブ内が閉塞し、アラームが誤作動したり、適正な換気が維持されない等の恐れがあります]。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

保管温度：－40～＋70℃

保管相対湿度：10～100%（非結露）

2. 有効期間・使用の期限

使用期限：外箱及び製品の包装に記載。

連続使用時間：推奨連続使用時間7日間

〔自己認証（製造業者データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

使用後は廃棄し、滅菌や再使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

製造業者名（国名）：Vincent Medical (Dong Guan) Manufacturing Co., Ltd.

（ビンセントメディカル（ドングアン）マニファクチャリング社）

（中国）