

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路セット JMDNコード 70566000

再使用禁止

ディスポ呼吸回路 410 (T バード/バード 8400 用)

【警告】
＜使用方法＞
* ◆呼吸回路の中に溜まった水は回路外に捨ててください[回路閉塞等により適正な換気が維持されない恐れがあり、また、患者さんに水が入ると気道閉塞、人工呼吸器に水が入ると故障につながる恐れもあります]。

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
* ◆再使用しないでください[本品は単回使用向けのため]。
* ◆消毒・滅菌処理しないでください[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があります]。
* ◆温度ポートにはF&P社製以外の気道温度計及び温度プローブを使用しないでください[他社製品では、温度プローブのセンサ部が呼吸回路から外れ、リークの発生する可能性があります]。
** ◆ネブライザを使用される際に、呼気側回路へのフィルタ装着はお止めください[目詰まりにより、患者さんに重篤な障害を起こす可能性があります]。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

呼吸回路、添付文書

2. パーツの名称と材質

図中 番号	名称	材質	数量
1	エルボ	PPR1510	1
2	テーパ蛇管 6" 15mm/22mm	PE&EVA	1
3	Yピース (温度ポート 2 個付)	PPR1510	1
4	温度ポートキャップ、VM	LLDPE2034G	2
5	アウトレットコネクタ	LLDPE2034G	7

6	蛇管 22mm × 36" (青)	PE&EVA	1
7	ウォータトラップ	PP	2
8	蛇管 22mm × 24" (透明)	PE&EVA	1
9	蛇管 22mm × 12" (青)	PE&EVA	1
10	チューブクリップ	PPJ750	3
11	90° メスコネクタ	N/A	1
12	蛇管 22mm × 36" (透明)	PE&EVA	1
13	チューブハンガ	PPJ750	1
14	蛇管22mm×24" (青)	PE&EVA	1
15	ストレートアダプタ 22mm オス× 15mm メス× 22mm オス	PPJ750	1

3. 原理

Tバード/バード8400STiの制御によって、呼気弁が開閉し、Tバード/バード8400STiからのガスが患者さんに送られます。


【使用目的又は効果】

人工呼吸器に接続し、呼吸管理に用います。

【使用方法等】

1. 取扱い方法

- * 1) 下の図に従い、Tバード/バード8400STi、加温加湿器に接続してください。
- 2) 患者さんに接続する前に、全ての接続部分に損傷・変形などの異常がないこと、呼吸回路を加圧してリークや閉塞のないことを確かめてください。
- 3) Tバード/バード8400STiの取扱説明書に従って、使用前の点検と使用中の点検を行い、異常のないことをモニタから確認してください。
- 4) 使用後は廃棄してください。

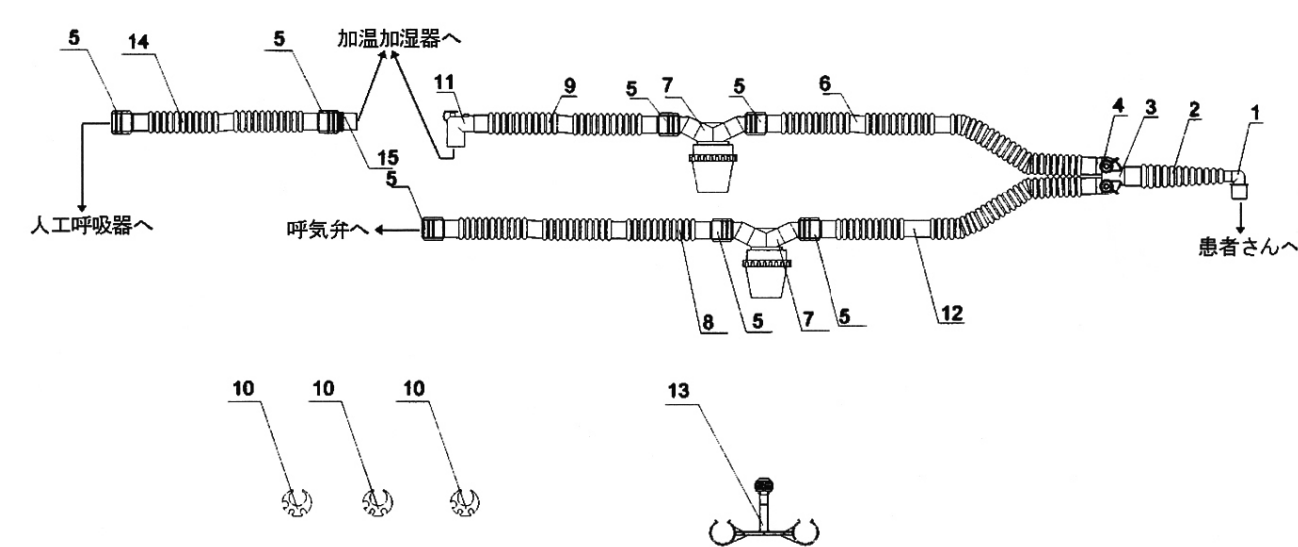

2. 使用中の点検

- * ◆ 呼吸回路のコネクタ類がしっかり接続されており、ひび割れや破損がなく、リークがないことを確認してください。
 - ◆ 院内の感染防止規定に則り、定期的に交換してください。
- * ◆ 呼吸弁付近の水抜きは、患者さんから呼吸回路をはずして実施してください。
 - ◆ 呼吸弁が正常に作動していることを確認してください。
 - ◆ 患者さんの胸の動きと気道内圧インジケータの指示を見て、設定通りの換気動作が行われていることを確認してください。
 - ◆ 異常な動作音や異臭などがないことを確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

保管温度 : -40～+70℃

保管相対湿度 : 10～100% (非結露)

2. 有効期間・使用の期限

使用期限 : 外箱及び製品の包装に記載。

連続使用時間 : 推奨連続使用時間 7 日間

[自己認証 (製造業者データ) による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

使用後は廃棄し、滅菌や再使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称 : アイ・エム・アイ株式会社

製造業者名 (国名) : Vincent Medical (Dong Guan) Manufacturing Co., Ltd.
(ビンセントメディカル (ドングアン) マニファクチャリング社)
(中国)