

機械器具 06 呼吸補助器

管理医療機器

呼吸回路セット *JMDNコード 70566000

再使用禁止

ディスポ呼吸回路 410（オニキスプラス / レジェンドエア用）

【警告】

<使用方法>

呼吸回路の中に溜まった水は回路外に捨ててください[回路閉塞等により適正な換気が維持されない恐れがあり、また、患者さんに水が入ると気道閉塞、人工呼吸器に水が入ると故障につながる恐れもあります]。

【禁忌・禁止】

<使用方法>

再使用しないでください[本品は単回使用向けのため]。

消毒・滅菌処理しないでください[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があります]。

温度ポートにはF&P社製以外の気道温度計及び温度プローブを使用しないでください[他社製品では、温度プローブのセンサ部が呼吸回路から外れ、リークの発生する可能性があります]。

ネプライザを使用される際に、呼吸側回路へのフィルタ装着はお止めください[目詰まりにより、患者さんに重篤な障害を起こす可能性があります]。

⑤	ウォータートラップ	PP	1
⑥	アウトレットコネクタ	LLDPE2034G	4
⑦	蛇管22mm×30”（青）	PE&EVA	1
⑧	蛇管22mm×36”（青）	PE&EVA	1
⑨	PVCチューブ（外径6.4mm、外径4.2mm、長さ84”）（透明）	PVC	1
⑩	チューブクリップ	PPJ750	3
⑪	90° メスコネクタ	N/A	1
⑫	アウトレットコネクタ（温度ポート付）	LLDPE2034G	1
⑬	温度ポートキャップ	LLDPE2034G	1

3.原理
 オニキスプラス又はレジェンドエアの制御によって呼吸弁が開閉し、オニキスプラス又はレジェンドエアからのガスが患者さんに送られます。

- 【使用目的又は効果】

人工呼吸器に接続し、呼吸管理に用います。

【使用方法等】

1.取扱い方法

- 1) 図に従って、併用する人工呼吸器、加温加湿器に接続してください。

⑬に、必ず併用する人工呼吸器の呼吸弁を取付けて、ご使用ください。鼻マスクでご使用いただく場合、①、②、③は使用しません。

2) 患者さんに接続する前に、全ての接続部分に損傷・変形などの異常がないこと、呼吸回路を加圧してリークや閉塞のないことを確かめてください。

3) 併用する人工呼吸器の取扱説明書の記載に従って、使用前の点検と使用中の点検を行い、異常のないことを確認してください。

4) 使用後は廃棄してください。


【形状・構造及び原理等】

1.構成

呼吸回路、添付文書

2.パーツの名称と材質

図中 番号	名称	材質	数量
①	エルボ	PPR1510	1
②	テーパ蛇管6”15mm/22mm	PE&EVA	1
③	ストレートアダプタ22mmオス×15mmメス×22mmオス	PPJ750	2
④	蛇管22mm×24”（青）	PE&EVA	1

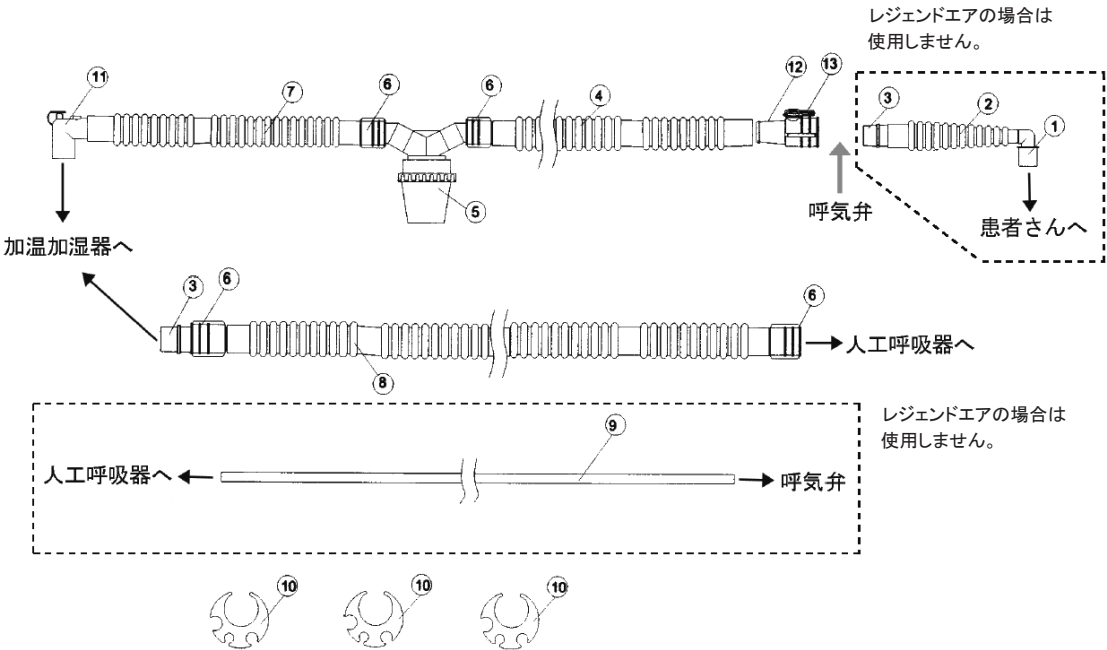

2. 使用対象機種

- ◆オニキスプラス、レジェンドエア

3. 使用中の点検

- ◆呼吸回路のチューブやコネクタ類がしっかり接続されており、ひび割れや破損がなく、リークがないことを確認してください。
- ◆院内の感染防止規定に則って、定期的に交換してください。
- ※ ◆呼吸弁付近の水抜きは、患者さんから呼吸回路をはずして実施してください。水の貯留が激しく、呼吸弁用PVCチューブ内にも水分の貯留が見られる場合、新品に交換してください。
- ◆呼吸弁が正常に作動していることを確認してください。
- ◆患者さんの胸の動きと気道内圧インジケータの指示を見て、設定通りの換気動作が行われていることを確認してください。
- ◆異常な動作音や異臭などがいないことを確認してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ※ ◆呼吸弁チューブに水滴が流入しないよう、チューブの差込口が常に上になるように設置してください。
- ※ ◆呼吸弁チューブに水滴が見られた場合には速やかに取り除いてください[水滴で、チューブ内が閉塞し、アラームが誤作動したり、適正な換気が維持されない等の恐れがあります]。

* 【保管方法及び有効期間等】

* 1. 保管方法

保管温度 : -40～+70℃

保管相対湿度 : 10～100% (非結露)

2. 有効期間・使用の期限

使用期限 : 外箱及び製品の包装に記載。

連続使用時間 : 推奨連続使用時間7日間

[自己認証(製造業者データ)による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

使用後は廃棄し、滅菌や再使用しないでください。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称 : アイ・エム・アイ株式会社

製造業者名(国名) : Vincent Medical (Dong Guan) Manufacturing Co., Ltd.
(ビンセントメディカル(ドングアン) マニファクチャリング社)
(中国)