

機械器具 06 呼吸補助器
 管理医療機器 呼吸回路セット JMDNコード 70566000

再使用禁止

ディスポ呼吸回路 410 (ネブライザキット)

- 【警告】

＜使用方法＞

◆呼吸回路の中に溜まった水は回路外に捨ててください[回路閉塞等により適正な換気が維持されない恐れがあり、また、患者さんに水が入ると気道閉塞、人工呼吸器に水が入ると故障につながる恐れがあります]。

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

◆再使用しないでください[本品は単回使用向けのため]。

◆消毒・滅菌処理しないでください[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があります]。


◆温度ポートにはF&P社製以外の気道温度計及び温度プローブを使用しないでください[他社製品では、温度プローブのセンサ部が呼吸回路から外れ、リークの発生する可能性があります]。

◆ネブライザを使用される際に、呼吸側回路へのフィルタ装着はお止めください[目詰まりにより、患者さんに重篤な障害を起こす可能性があります]。

- 【形状・構造及び原理等】

1.構成

ネブライザキット、添付文書

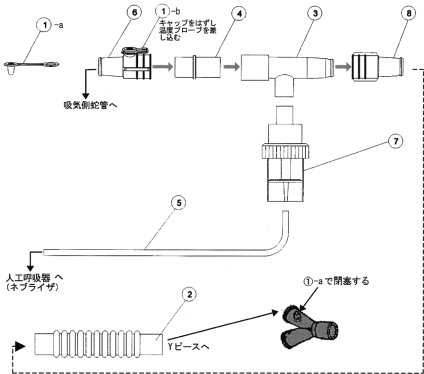

名称	材質	数量	名称	材質	数量
1 温度ポートキャップ(NM)	LLDPE 2034G	2	6 アウトレットコネクタ (固定ポート付)	LLDPE 2034G	1
2 蛇管 22mm×6' (0)	PE&PVA	1	7 ネブライザ	N/A	1
3 Yコネクタ	N/A	1	8 アウトレットコネクタ	LLDPE 2034G	1
4 ストレートアダプタ 22mm オス×15 メス×22mm オス	PPU750	1			
5 PVCチューブ (0.65×5mm、P(0.65×5mm、長さ750) GMP)	PVC	1			

- 2.原理

併用する人工呼吸器の制御によって、ネブライザ部分で、薬液が霧状に噴霧されます。

- 【使用目的又は効果】

人工呼吸器に接続し、呼吸管理に用います。

- 【使用方法等】

1.取扱い方法

1) 併用する人工呼吸器の呼吸回路に接続してください。

2) 患者さんに接続する前に、全ての接続部分に損傷・変形などの異常がないこと、呼吸回路を加圧してリークや閉塞のないことを確かめてください。

3) 併用する人工呼吸器の取扱説明書に従って、使用前の点検と使用中の点検を行い、異常のないことを確認してください。

4) 使用後は廃棄してください。

- ** 2.使用中の点検

◆チューブやコネクタ類がしっかり接続されており、ひび割れや破損がなく、リークがないことを確認してください。

◆患者さんの胸の動きと気道内圧インジケータの指示を見て、設定通りの換気動作が行われていることを確認してください。

◆院内の感染防止規定に準じて、定期的に交換してください。

◆異常な動作音や異臭などがいないことを確認してください。

- 【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

保管温度 : -40～+70℃

保管相対湿度: 10～100%(非結露)

2.有効期間・使用の期限

使用期限 : 外箱及び製品の包装に記載。

連続使用時間: 推奨連続使用時間7日間

[自己認証(製造業者データ)による]

- 【保守・点検に係る事項】

1.使用者による保守点検事項

使用後は滅菌や再使用しないでください。

- 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称: アイ・エム・アイ株式会社

製造業者名(国名): Vincent Medical (Dong Guan) Manufacturing Co., Ltd.

(ビンセントメディカル(ドングアン)マニファクチャリング社)

(中国)