

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路セット JMDNコード 70566000

ブリージングシステム

再使用禁止

【警告】

- ** ◆ 本品を使用する前に、呼吸回路の接続部が確実に接続されていることを確認し、人工呼吸器等に接続し、リークや閉塞がないことを確かめてください [閉塞やリークにより換気障害が生じる恐れがあります]。

【禁忌・禁止】

- ** ◆ 再使用禁止
- ** ◆ 消毒・滅菌処理をしないでください [本品に変質等の品質上の不具合が生じる可能性があります]。
- <併用医療機器>
- ** ◆ 本品は人工鼻仕様のため、加温加湿器を併用しないでください [露滴が患者さんの気道に入ったり、人工鼻のフィルタが閉塞し、換気が困難となる恐れがあります]。


【形状・構造及び原理等】

** 1. 構成

- ** 本品は形状、寸法に示す部品で構成されている。

** 2. 形状、寸法

- ** 1) 成人用人工鼻呼吸回路(51003660)

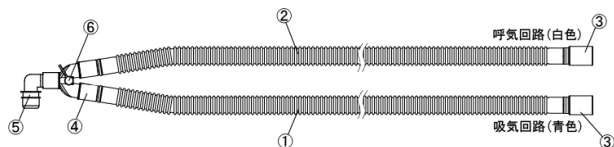

	セット内容
①	チューブ(ブルー) 内径22mm 長さ 150cm
②	チューブ(クリア) 内径22mm 長さ 150cm
③	カフコネクタ
④	パラレルYピース(シングルポート、キャップ付)
⑤	ペイシエントエルボー(キャップ付)
⑥	シングルポート(キャップ付)

** 3. 作動原理

- ** 使用目的に合わせ、構成部品を選択して使用することにより、人工呼吸器等の呼吸回路部品として使用できる。呼吸回路は中空である呼吸管内にガスを通過させることによって目的の場所に送気するものである。

【使用目的又は効果】

人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】

<使用方法>

- ** 1. チューブ①の一端に付いたカフコネクタ③を人工呼吸器の空気流出口に接続してください。
- ** 2. チューブ②の一端に付いたカフコネクタ③を人工呼吸器の取扱説明書に従って人工呼吸器に接続してください。

- ** 3. シングルポート⑥は、使用しない時は漏れがないように付属のポートキャップをしっかりと取付けてください。
- ** 4. 患者に装着する前に、テストラングを使用して人工呼吸器が正しく作動することを確認してください。
- ** 5. ペイシエントエルボー⑤に人工鼻を装着し、患者に接続してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ** ◆ 回路の接続部を万一外した場合は、コネクタのテーパ表面に水その他の付着がなく、清潔かつ乾燥した状態で接続してください。
- ** ◆ 呼吸回路に空気漏れ等の問題がある場合は、すぐに呼吸回路を交換してください。
- ** ◆ 本品に過剰な負荷がかからないように注意してください [回路の潰れや折れ曲がりにより、閉塞等の原因となるため]。
- ** ◆ 使用中は患者さんの状態に十分に注意を払ってください。
- ** ◆ 使用中に回路の外れや折れ曲がりがないよう適宜確認してください。
- ** ◆ 本品を人工呼吸器等に接続して使用する際は、呼吸回路にリーク及び分泌物による閉塞・流量抵抗の増大が生じていないことを確認してください。

<その他の注意>

- ** ◆ 直射日光、高温、多湿な場所や、水濡れを避けて室温で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

** <保管環境>

温度：－10～50℃

- ** 湿度：15～95%(非結露)

<使用期間>

2週間を目安に使用してください(自己認証による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ** 製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

- ** 製造業者名(国名)：Vincent Medical (Dong Guan)

Manufacturing Co., Ltd.

(ビンセントメディカル(ドングアン)マニファク

チャリング社)(中国)