

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路セット JMDNコード 70566000
ブリージングシステム

再使用禁止

【警告】

- ◆ 本品を接続する際は、本品及び接続した呼吸回路等に漏れや閉塞がないか確認してください[閉塞やリークにより換気障害が生じるおそれがあります]。
- * ◆ 使用中に空気漏れ等の問題がある場合は、すぐに交換してください[リークにより換気障害が生じるおそれがあります]。

【禁忌・禁止】

- ◆ 再使用禁止
- * ◆ 消毒・滅菌処理をしないでください[本品に変質等の品質上の不具合が生じる可能性があります]。


【形状・構造及び原理等】

* 1. 構成


- * 本品は形状、寸法に示す部品で構成されている。

* 2. 形状、寸法

- * 1) カテーテルマウント (51005238)

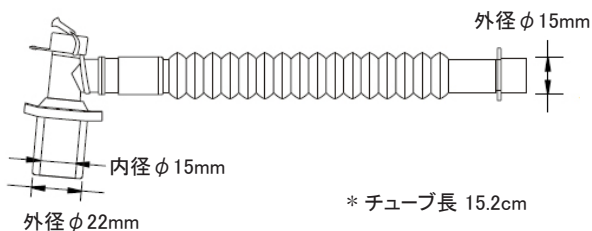

- ** 2) カテーテルマウントストレートタイプ (51011060)

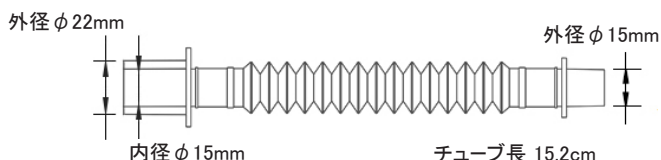

* 3. 作動原理

- * 使用目的に合わせ、構成部品を選択して使用することにより、人工呼吸器等の呼吸回路部品として使用できる。呼吸回路は中空(中が空洞)である呼吸管内にガスを通過させることによって目的の場所に送気するものである。

【使用目的又は効果】

- * 人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】

＜使用前の確認＞

1. 患者さんに使用する前に、全ての接続部(アクセサリも含めて)が、使用中に緩まないようにしっかり接続されていることを確認してください。
2. 使用準備ができたなら呼吸回路をテストラング及び人工呼吸器に接続して回路に空気を流し、漏れなどがなく正常に作動することを確認してください。

＜使用方法＞

1. 使用する直前にパッケージを開封し、取り出してください。
2. 呼吸回路及び気管チューブ等にゆるみや外れが生じないように確実に接続してください。

【使用上の注意】

* **＜重要な基本的注意＞**

- * ◆ 回路の潰れや折れ曲がりにより、閉塞等の原因となるため、本品に過剰な負荷がかからないように注意してください。
- * ◆ 使用中に回路の外れがないよう適宜確認してください。
- * ◆ 呼吸回路に空気漏れ等の問題がある場合は、速やかに呼吸回路を交換してください。
- * ◆ 回路内に分泌物が蓄積された場合は、すぐに呼吸回路を交換してください。
- * ◆ 本品を人工呼吸器等に接続して使用する際は、呼吸回路にリーク及び分泌物による閉塞・流量抵抗の増大が生じていないことを確認してください。

* **＜その他の注意＞**

- * ◆ 直射日光、高温、多湿な場所や水濡れを避け、室温で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管・輸送環境＞

温度: -10~50℃

- * 湿度: 15~95%(非結露)

＜使用環境＞

温度: 5~35℃

- * 湿度: 15~95%(非結露)

＜使用期間＞

- * 2週間を目安に使用してください(自己認証による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- * 製造販売業者の名称: アイ・エム・アイ株式会社

- * 製造業者名(国名): Vincent Medical (Dong Guan)

Manufacturing Co., Ltd.

(ビンセントメディカル(ドングアン)マニファクチャリング社)(中国)