

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路セット JMDNコード 70566000
ブリージングシステム

【警告】

◆ 本品を使用する前に、呼吸回路の接続部が確実に接続されていることを確認し、人工呼吸器等に接続し、リークや閉塞がないことを確かめてください[リークや閉塞により換気障害が生じるおそれがあります]。

【形状・構造及び原理等】**1. 構成**

本品は形状、寸法に示す部品で構成されている。

2. 形状、寸法

ウォータートラップ リュースタイプ (51010633)

**3. 作動原理**

使用目的に合わせ、構成品を選択して使用することにより、人工呼吸器等の呼吸回路部品として使用できる。呼吸回路は中空である呼吸管内にガスを通過させることによって目的の場所に送気するものである。

4. コネクタ径


22M-22M

【使用目的又は効果】

人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に破損等がないことを確認してください。破損や劣化が認められた場合はすぐに交換してください。
- 2) キャップに付いているストッパーが、貯水カップのストッパーの一番奥までくよう、しっかりと嵌めてください。(主要文献1参照)

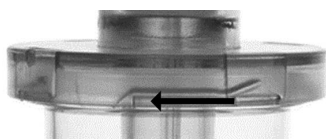

- 3) 患者さんに使用する前に、全ての接続部(アクセサリも含めて)が、使用中に緩まないようにしっかり接続されていることを確認してください。

- 4) 患者さんに装着する前に、接続した状態で人工呼吸器が正しく作動することを確認してください。

【使用上の注意】**<重要な基本的注意>**

- ◆ 接続部を外した場合は、コネクタのテーパー表面に水その他の付着がなく、清潔かつ乾燥した状態で接続してください。
- ◆ 本品に貯留した水は適宜排水してください。排水後は、貯水カップを適切に取付け、リークがないことを確認してください。(主要文献1参照)
- ◆ 使用中にリーク等の問題がある場合は、すぐに交換してください。
- ◆ 本品を人工呼吸器等に接続して使用する際は、呼吸回路にリーク及び分泌物による閉塞・流量抵抗の増大が生じていないことを確認してください。

<その他の注意>

- ◆ 直射日光、高温、多湿な場所や、水濡れを避けて室温で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】**<保管環境条件>**

温度：-40～60℃
湿度：0～95% (非結露)

<有効期間>

3年

<使用期間>

洗浄・消毒・滅菌 20回

【保守・点検に係る事項】

- ◆ 少なくとも7日ごとにクリーニングしてください。

1. 分解

貯水カップからキャップを外してください。
キャップに取付けられているスプリングやOリング等は、無理に外すと破損の原因になるため、分解しないでください。

2. クリーニング**<用手洗浄>**

- (1) 水道水で、汚れを洗い流してください。必要に応じ、柔らかいブラシ等をご使用ください。
- (2) 中性洗剤を少量加えたぬるま湯に浸してください。
- (3) 柔らかいブラシ等で、汚れを落としてください。
- (4) 水道水ですすいでください。
- (5) 自然乾燥してください。

＜機械洗浄＞

- (1) 冷たい流水（水道水）を流しながらすすぎ、汚れ等を取り除いてください。
- (2) 部品をマニホールドラック又は洗浄機内のワイヤーバスケットの上に置いてください。
- (3) 下記のサイクル例を参考にし、自動洗浄してください。

ステージ	時間	温度	洗浄タイプ
洗浄前	4分	冷水 (<40℃)	
洗浄	5分	55℃	アルカリ系洗浄剤
中和	3分	>40℃	
すすぎ	5分	>40℃	
熱消毒	5分	93℃	
乾燥	30分	70℃	

＜滅菌＞

- (1) 用手洗浄又は機械洗浄を行ってください。
- (2) オートクレーブを使用して、121℃にて30分、乾燥時間20～40分のサイクルで滅菌してください。
- (3) 自然乾燥してください。

＜クリーニング後の確認＞

損傷、残留物、過度の磨耗がないか、全ての部品を点検してください。破損や劣化が認められた場合は、廃棄してください。

【主要文献及び文献請求先】

（主要文献）

1. 薬食安発第0305001号「人工呼吸器回路内のウォータートラップの取扱いに関する医療事故防止対策について（依頼）」（平成21年3月5日、厚生労働省）

（文献請求先）

アイ・エム・アイ株式会社 マーケティング部
TEL：03-5829-5803

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

製造業者名（国名）：Vincent Medical (Dong Guan)

Manufacturing Co., Ltd.

（ビンセントメディカル（ドングアン）マニユファクチャリング社）（中国）