

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科用顔弓 35700000


堀江式バイトゲージ

【形状・構造及び原理等】

本品は休息咬合における顎の高さを測定する為の器具である。目盛板を取り付けたベースの一端に鼻低板が付いている。ベースにはスライダに装着された直立の支柱が取り付けられてある。スライダによって目盛板上を左右に円滑に移動することが出来る。また止めネジによって所定の位置に固定出来る。

【形状・構造等】

1) 形状

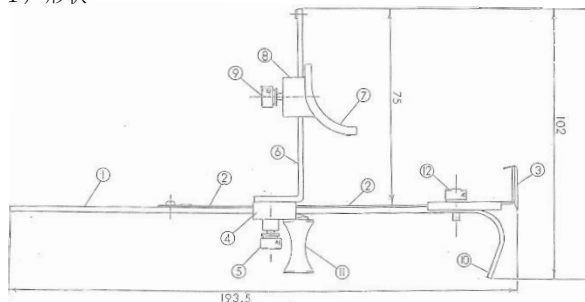

2) 材質・組成

①ベース	: 真鍮	⑦顎座	: ナイロン樹脂
②目盛板	: ステンレス	⑧スライダ	: 真鍮
③鼻低板	: 真鍮	⑨止めネジ	: 真鍮
④スライダ	: 真鍮	⑩手掌幅測定版	: 真鍮
⑤止めネジ	: 真鍮	⑪手掌幅測定ガイド	: 真鍮
⑥支柱	: 真鍮	⑫止めネジ	: 真鍮

【使用目的又は効果】

休息咬合における顎の高さを測定する器具

【使用方法等】

- 1) ベースの下側に左掌をあて第 2 指から第 5 指までの付け根の部分を手掌幅測定板に合わせた後、手掌幅測定ガイドを左右に移動させて手掌幅に固定する。
- 2) 顎座に顎を乗せた後鼻低板と鼻低の正中に当てて顎の高さと一致することを確認する。
- 3) 顎座の位置を目盛板によって目盛を読んで休息咬合における顎の高さになる。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件で滅菌前の洗浄・滅菌を行い使用すること。
- 2) 本製品の使用によりアレルギー反応が現れた場合は直ちに使用を中止すること。
- 3) 破損等の原因になるので以下は行なわないこと。
 - ①本製品に対する改造（曲げ・切削等）
 - ②粗雑な扱い（キズを付ける・落下させる・強い衝撃を与える等）
 - ③バーナーを用いた加熱。
- 4) 使用の際は無理な角度・過度の加圧を避けること。
- 5) 薬液等が付着した場合腐食するおそれがあるので注意すること。
- 6) 本品及び破折片等の誤飲に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管の条件」

- ①長時間の日光などの紫外線を避けて保管してください。
- ②火気の近くに保管しないでください。
- ③腐食を避ける為、錆びている物と一緒に保管しないでください。
- ④化学薬品と一緒に保管しないでください。
- ⑤破損しないように金属等重たい物と一緒に保管しないでください。
- ⑥水分が付着したまま長時間放置すると錆染み等の原因となることがあるので、洗浄・滅菌後は十分に乾燥させてから保管すること。

【保守・点検に係る事項】

（使用者による保守点検事項（日常点検）

- 1) 以下の方法及び条件で患者ごとに滅菌前の洗浄・滅菌を行うこと。
 - ①洗浄方法：精製水を用いて器具の洗浄を行うこと。
 - ②滅菌方法：アルコール消毒
 - ・顎座部分はナイロン樹脂を使用している為、オートクレーブ滅菌等は絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
 - ③洗浄・滅菌には精製水、アルコール消毒を使用すること。
 - ④使用後は本体に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去し洗浄すること。
 - ⑤次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、ポビドヨード、ホルマリンフェノール等金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。
 - ⑥各部正常に動くか確認すること。
 - ⑦磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止
 - ・劣化の原因になるので洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシを使用しないこと。
 - ⑧必ず使用前、使用後に器具の点検をすること。

- 2) 使用前に本製品の外観の汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食及び劣化等の異常がないかについて点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：有限会社 秋山歯科器具製作所
電話番号：03-3871-6522
製造業者：有限会社 秋山歯科器具製作所