

2014年 5月 作成

2016年 12月 改定

2019年 11月 改定

医療機器認証番号226AFBZX00085000

類別：機械器具81 磁気治療器

管理医療機器 一般的名称：家庭用永久磁石磁気治療器（コード：71016000）

テラピューティック ウェストサポーターNeo1300

【警告】


以下のような磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を装着している人は、使用しないでください

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- ・脳せき(脊)髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

【形状・構造及び原理等】

＜各部の名称及び動き＞


本体外側

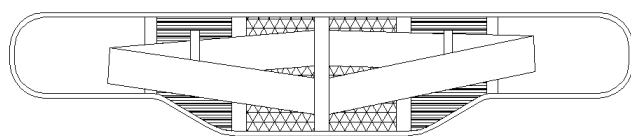

磁気シート（大）

磁気シート（小）

本体内側

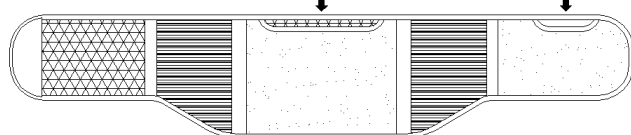

寸法(mm)： M 950 L 1070
LL 1160 3L 1250

＜原理＞

本品は、 $\phi 20 \times 3$ の磁石を20個配置した磁気シート（大）、磁石を4個配置した磁気シート（小）を、腹巻きの背部及び腹部に当たる部分にあるポケットに挿入して使用する腹巻き型の家庭用永久磁石磁気治療器である。

【使用目的又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用する。

【品目仕様等】

磁束密度 130mT

磁石寸法 $\phi 20 \times 3$ (mm)（フェライト磁石）

【使用方法】

- 1) ポケット部に磁気シートが入っていることをご確認ください。
- 2) 磁気シート（大）が腰部にくるように装着します。腹部が苦しくない位置で面ファスナーを止めてください。
- 3) お好みにより、ゴムベルトで巻きつける強さを調節してください。
- 4) 肌に直接ではなく、薄い下着を付けてから着用ください。

【使用上の注意】

＜ご使用前の注意＞

- ・次の人は使用前に医師に相談してください。
 - ・悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
 - ・心臓に障害のある人。
 - ・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
 - ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
 - ・皮膚に感染症のある人及び創傷のある人。
 - ・安静を必要とする人。
 - ・体温38℃以上(有熱期)の人。
 - ・急性炎症症状〔けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期。
 - ・衰弱しているとき。
- ・ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性〔とう(疼)痛性〕疾患の人。

- ・時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- ・使用前に本体や磁石シートに破れがないか、また金属の異物が吸引付着していないか確認してからご使用ください。
- ・しばらく使用しなかったときには、表面に金属の異物が吸引付着していないか確認してからご使用ください。
- ・他の治療器と同時に使用しないでください。
- ・改造又は分解しないでください。
- ・不具合を見つけたときには勝手に修理などせず販売店に連絡してください。
- ・頭部に使用しないでください。

＜ご使用中の注意＞

- ・使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家にご相談ください。
- ・治療器に異常が発見された時は、使用を直ちに中止してください。
- ・身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- ・装着部に発しん(疹)、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止してください。
- ・磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける時は、受ける前に使用を中止してください。

＜ご使用後の注意＞

- ・使用後の廃棄については各自治体の定めに従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・本体を清潔に保ち、金属等が付着しないように気をつけて保管してください。

【包装】

本体	1個
磁気シート（大）	1個
磁気シート（小）	1個
取扱説明書	1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社朝日

住 所：東京都小平市上水本町二丁目18番20号

製造業者：株式会社朝日

住 所：東京都小平市上水本町二丁目18番20号

取扱説明書を必ずご参照ください