

ロクショウサポーター


【形状・構造及び原理等】

【警告】（併用医療機器）

以下のような磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を装着している人は使用しないでください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- 脳せき(背) 髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

〈形状〉

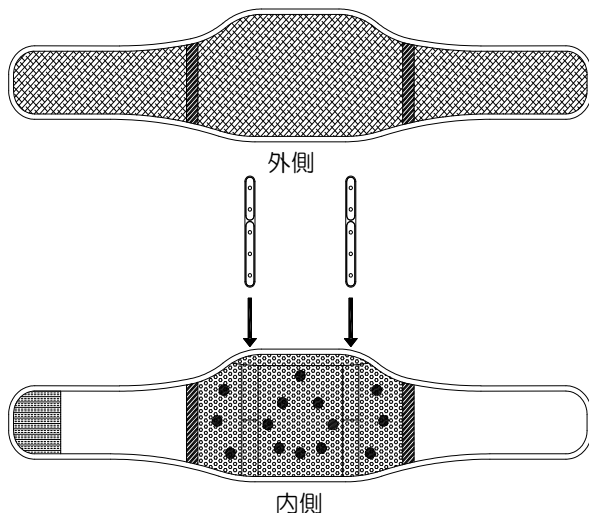

〈原理〉

本品は、Φ5×1.5 のネオジウム磁石を2個又は3個内蔵した磁気シートが1個又は2個装着されたナイロンバーを腹巻の背の部分のボーンに挿入した腹巻き型の家庭用永久磁石磁気治療器である。

【使用目的又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

- 1) ナイロンバーには表と裏がありますので、入れ方を間違えないようにご注意ください。
- 2) ナイロンバーが腰部にくるように装着します。腹部が苦しくない位置で面ファスナーを止めてください。
- 3) 肌着の内側に巻いてお使いください。
- 4) 柄がある面が内側、腰に当てた際、品質表示タグが右に来るように当ててお使いください。

取扱説明書を必ずご参照ください

【使用上の注意】

〈ご使用前の注意〉

- 次の人は使用前に医師に相談してください。（適用対象(患者)）
 - ・ 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
 - ・ 心臓に障害のある人。
 - ・ 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
 - ・ 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
 - ・ 皮膚に感染症又は創傷のある人
 - ・ 安静を必要とする人。
 - ・ 体温 38℃以上(有熱期)の人。
 - （ - 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
 - （ - 衰弱しているとき。
 - ・ ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人。
- 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- 使用前に縫製の破れが無いことや磁石装着部に破れが無い、また金属の異物が吸引付着していないかを確認してから使用してください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。
- 改造又は分解しないでください。
- 故障した場合は勝手に修理などせず販売店に連絡してください。
- 頭部に使用しないでください。

〈ご使用中の注意〉

- 使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。
- 治療器に異常が発見された時は、使用を直ちに中止してください。
- 身体に異常を感じた時は、使用を直ちに中止してください。
- 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける時は、受ける前に使用を中止してください。
- 装着部に発しん(疹)、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を中止してください。
- 長時間使用する場合は適宜装着しなおしてください。長時間の圧迫などによる皮膚障害、血行障害などを起こす恐れがあります。
- 面ファスナーが他の衣類に付かないように装着してください。ほつれや伝線の原因となる恐れがあります。

〈ご使用後の注意〉

- 使用後の廃棄については各自治体の定めに従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 本体を清潔に保ち、金属等が付着しないように注意して保管してください。
- 本製品を洗濯する場合は、お湯ではなく水を使用し、必ず手洗いをしてください。洗濯機は使用しないでください。また、色の薄いものと一緒に選択しないでください。色落ちやほかの生地に移りする場合があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社朝日
住所：東京都小平市上水本町二丁目 18 番 20 号
製造業者：株式会社朝日
住所：東京都小平市上水本町二丁目 18 番 20 号