

フレミン

【警告】

以下のような磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人は、使用しないでください。


- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- ・脳せき(脊)髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

＜作動原理＞

鉄心上に巻いた巻線に交流電流を通電することにより、両磁極間の空間に交流磁束流を発生させ、患部に磁束流を注ぐことにより治療効果を与える磁気治療器である。コントローラーで10分、20分又は30分の治療時間の中から選択できる。

【形状、構造及び原理等】

＜各部の名称及び動き＞

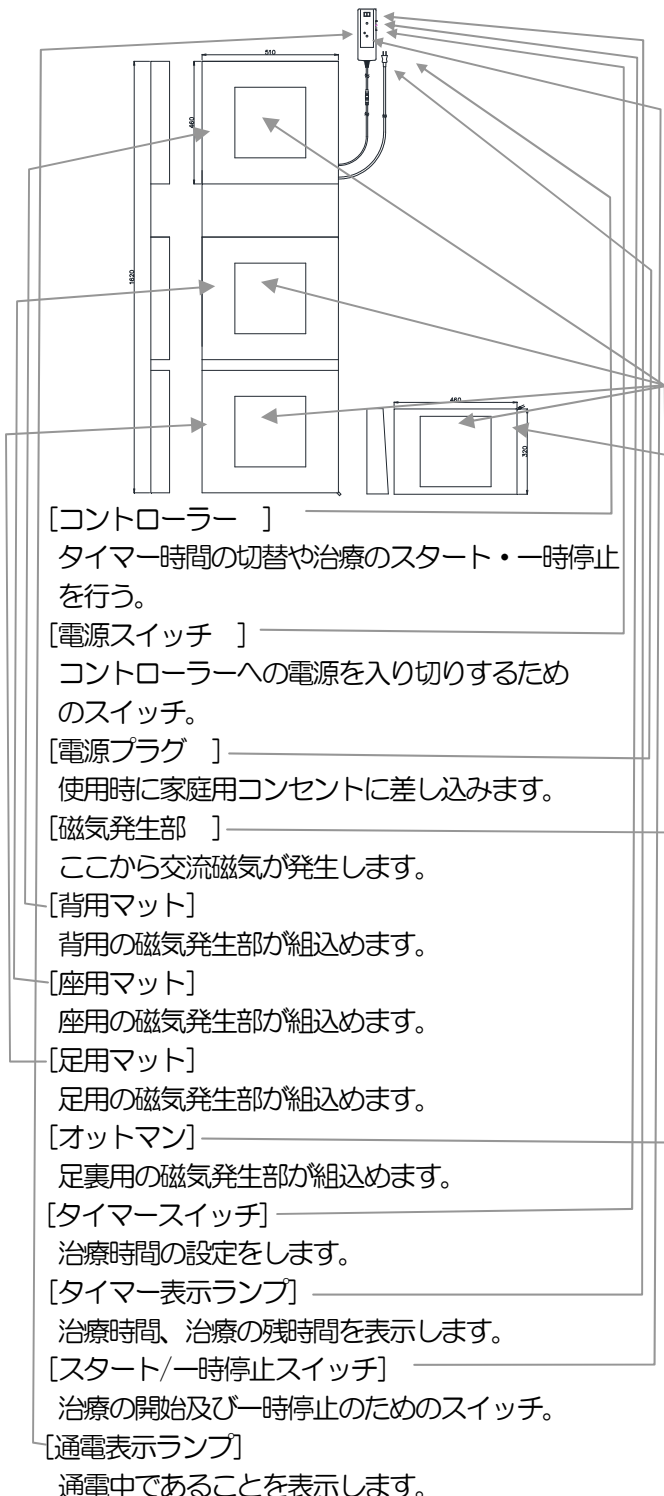

＜電気的仕様＞

定格電圧 AC100V

定格周波数 50/60Hz

定格電流 磁気発生部 (磁極1組) 1個タイプ 1. 45/1. 16A(50/60Hz)

磁気発生部 (磁極2組) 1個タイプ 2. 8/2. 3A(50/60Hz)

磁気発生部 (磁極2組) 2個タイプ 5. 4/4. 4A(50/60Hz)

磁気発生部 (磁極2組) 3個タイプ 8. 0/6. 8A(50/60Hz)

磁気発生部 (磁極2組) 4個タイプ 10. 6/8. 6A(50/60Hz)

最大磁束密度 180mT/140mT (50Hz/60Hz)

【使用目的又は効果】


装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用する。

【使用方法】

- 1) 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 2) 治療器に乗ってください。
- 3) コントローラーの電源スイッチを「入」にしてください。
※タイマー表示ランプが点灯します。前回の設定時間を表示します。
※出荷時の設定時間は10分となっています。
※スイッチの操作はケースのスイッチ部に刻印されている「入」「切」の方向に操作してください。
- 4) タイマースイッチを押して治療時間を10分、20分又は30分から選択してください。10分→20分→30分→10分の順に変わります。
※3秒間長押ししてください (押し間違いを防止するため)
※残り時間の下に設定時間が表示されます。
- 5) スタート/一時停止スイッチを押して治療を開始します。
※通電表示ランプが点灯します。
※通電中にスタート/一時停止スイッチを押すと治療が中断します。
※タイマー表示ランプは、治療の残り時間を表示します。
- 6) 設定した時間で治療が終了します。
※通電表示ランプが消灯します。
- 7) 使用後は、必ず電源スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
※使用を、途中で中止する場合も、電源スイッチを「切」にしてください。
- 8) コントローラーは掃除や運搬時に便利のように着脱できるようになっています。コントローラーをはずすときは、コードの中間にあるコネクターをはずしてください。ご使用になる時は、忘れずにしっかりとコネクターを接続してからお使いください。

取扱説明書を必ずご参照ください

9) コネクターの着脱は以下の手順に従ってください。

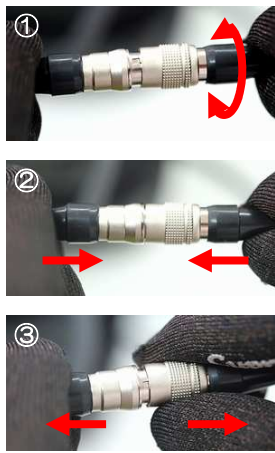

■ 取り付け方

① コネクターは嵌合の向きが決まっています。片側を回転させながら、嵌合の向きを探します。

② 両側から押し込みます。

■ 取り外し方

③ 図の位置をつまみながら引き抜きます。

※ コード部をつまんで引っ張ると破損するおそれがあります。必ずコネクター部をつまんでください。

【使用上の注意】

＜ご使用前の注意＞

次の人は使用前に医師に相談してください。

- ・悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
- ・心臓に障害のある人。
- ・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- ・糖尿病などによる高度な抹しょう(消)循環障害による知覚障害のある人。
- ・温度感覚喪失が認められる人。
- ・皮膚に感染症又は創傷のある人。
- ・安静を必要とする人。
- ・体温 38℃以上(有熱期)の人。
 - ・急性炎症症状 [けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期。
 - ・衰弱しているとき。
- ・ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性 [とう(疼)痛性] 疾患の人。
- ・時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- ・スイッチが、正常に作動するか確認してからご使用ください。
- ・すべてのコードは容易に抜けないように、正しく確実に接続してください。
- ・しばらく使用しなかったときは、使用前に機器が正常に、かつ、安全に作動することを確認してからご使用ください。
- ・他の治療器と同時に使用しないでください。
- ・AC100V 以外では使用しないでください。
- ・浴室などの湿度の高いところでは使用しないでください。
- ・安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)を単独で使用しないでください。
- ・子供がこの機器で遊ばないように、監視してください。

＜ご使用中の注意＞

- ・使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談ください。
- ・ご使用は1回30分以内です。同一ヶ所への連続使用はしないでください。
- ・機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- ・停電のときは直ちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・機器には水分(水やお茶等)がかからないようにしてください。感電や故障の原因になります。

＜ご使用後及び保管上の注意＞

- ・使用後は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源プラグを抜く時は、コードをもって引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。
- ・次の使用に支障のないように清浄にし、湿気のすくないところに整理、保管してください。
- ・お手入れは電気掃除機で表面のホコリを吸い取る程度にしてください。製品の丸洗いは出来ません。磁気発生部が汚れた時は、中性洗剤を布に浸してふき取ってください。シンナー、ベンジンは使用禁止です。
- ・電源コードが破損した時や故障を発見した場合は、勝手にいじらず、販売店又は製造販売元(042-321-7120)にご連絡ください。
- ・機器は、改造又は分解しないでください。
- ・梱包資材及び機器本体の廃棄については各自治体の定めに従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・暖房器具のそば、日光の当たるところ、ほこりの多いところ、湿気の多いところを避けて保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社朝日

住 所：東京都小平市上水本町二丁目18番20号

製造業者：株式会社朝日

住 所：東京都小平市上水本町二丁目18番20号