

磁気のものぞみ

【禁忌・禁止】 次のような人は使用しないでください。

- ペースメーカーなどの、電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの、磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人


形状・構造及び原理等

【原理】

本体に内蔵した電磁石に AC100V を通電して交流磁場をつくり、その磁力により患部を治療します。

本体は 2 個所にヒンジを有し、身体の装着部位の曲面に合わせて最大 30°ずつ、合計最大 60° 折り曲げることができます。治療時間は 10 分、20 分、30 分の中から選択できます。

【各部の名称】

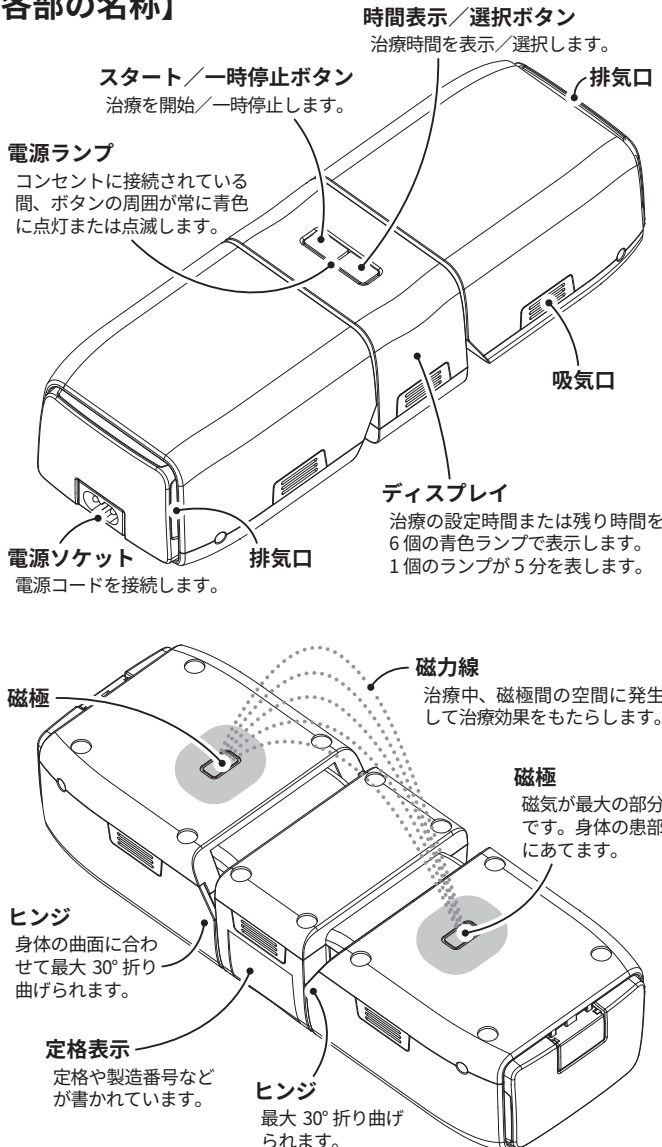

【付属品】

- 電源コード（7A、125V、IEC-60320-C7 型コネクタ）
- 取扱説明書、添付文書（本書）

【仕様】

本体寸法	234×80×52 mm	
本体重量	1.0 kg	
定格電圧	AC 100V	
定格周波数	50 Hz	60 Hz
定格電流	0.98 A	0.81 A
定格容量	98 VA	81 VA
最大磁束密度	180 mT	140 mT

使用目的又は効果

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用するこ

使用方法等

【設置のしかた】


- 本体の電源ソケットに電源コードを接続します。容易に外れないように正しく確実に接続してください。
- 電源プラグをコンセントに挿し込みます。電源ランプ（ボタンの周囲）が青色に点灯していることを確認してください。
- 本体を身体の曲面に合わせて折り曲げ、底面の磁極を被服の上から患部にあてます。

【治療のしかた】

■治療時間を表示する： 停止中に時間表示／選択ボタンを押すと、選択された治療時間がディスプレイに 2 秒間表示されます。治療時間が 10 分の場合は 2 個、20 分の場合は 4 個、30 分の場合は 6 個のランプが点灯します。

■治療時間を選択する： 停止中に時間表示／選択ボタンを 2 秒間長押しする毎に、治療時間が 10 分→20 分→30 分→10 分 ... の順に選択されます。

■治療を開始する： 停止中にスタート／一時停止ボタンを押すと治療が開始されます。治療中は磁気が発生し、冷却ファンが動作し、電源ランプが点滅します。また、治療の残り時間がディスプレイに表示され続けます。

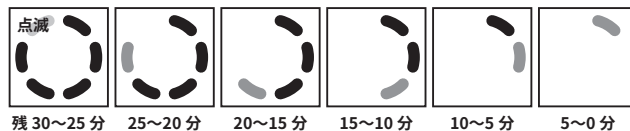

■治療を一時停止する： 治療中にスタート／一時停止ボタンを押すと治療が一時停止します。一時停止中は磁気が発生が停止し、ディスプレイの残り時間表示が点灯します。電源ランプの点滅と冷却ファンの動作は続きます。

■治療を再開する： 一時停止中にスタート／一時停止ボタンを押すと治療が再開します。

■治療を終了する： 選択した治療時間が経過すると自動的に終了します。または、一時停止中に時間表示／選択ボタンを 2 秒間長押しすると治療が中断・終了します。

取扱説明書を必ずご参照ください

使用上の注意

- 次の人は使用前に医師に相談してください。
 - 悪性腫瘍のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠初期の不安定期や出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 温度感覚喪失が認められる人
 - 皮膚に感染症や創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温 38℃以上（有熱期）の人
 - ・ 急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期
 - ・ 衰弱しているとき
 - 捻挫、肉離れなど、急性（疼痛性）疾患の人
- 使用しても効果が現れない場合は、医師や専門家に相談してください。
- 浴室など、湿度の高いところでは使用しないでください。
- 電源コードは付属のものを使用してください。
- お客様ご自身による修理は絶対にしないでください。故障を発見した際は販売店に連絡してください。
- 分解・改造は絶対にしないでください。
- 安全に責任を負う人の監視・指示がない限り、補助を必要とする人や子供は単独で使用しないでください。
- 子供が本品で遊ばないように監視してください。
- 頭部には使用しないでください。
- 同時に複数の人で使用しないでください。

【使用前の注意】

- 時計、磁気カードなど、磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- 電源コードは、容易に外れないように正しく確実に接続してください。
- ボタンやタイマーが正常に動作するか確認してから使用してください。
- しばらく使用しなかったときは、取扱説明書に準じて本品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。

【使用中の注意】

- 同一部位への使用は必ず 30 分以内としてください。
- 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- 破損や故障が発見されたときは、使用を直ちに中止し電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 停電のときは、使用を直ちに中止し電源プラグをコンセントから抜いてください。

【使用後・保管時の注意】

- 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときや、電源コードを本体から外すときは、コード部分を持たずに必ず先端のプラグをもって引き抜いてください。
- 次回の使用に支障がないように清浄にし、湿気の少ない場所に整理・保管してください。
- 丸洗いはできません。本体に水や飲物がかからないようにしてください。
- 汚れたときは、中性洗剤を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふき、その後、洗剤が残らないように十分にふき取ってください。
- 梱包部材を含む本品の廃棄については、各自治体の定めに従ってください。

保管方法及び有効期間等

【お手入れのしかた】

- 中性洗剤を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふき、その後、洗剤が残らないように十分にふき取ってください。
- 丸洗いはできません。本体に水をかけないでください。
- 有機溶剤、研磨剤、アルカリ性洗剤などは使わないでください。

【保管のしかた】

- 電源コードを本体から外して保管してください。電源コードを本体から外すときは、先端のコネクタを持ってまっすぐ引き抜いてください。
- 高温／多湿の場所、ほこりの多い場所、日の当たる場所、暖房器具のそばなどを避けて保管してください。
- 本体は精密機器です。高所に保管したり、重い物を上に乗せた状態で保管しないでください。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

【製造販売業者】

株式会社朝日
東京都小平市上水本町二丁目 18 番 20 号

【製造業者】

株式会社朝日
東京都小平市上水本町二丁目 18 番 20 号