

機械器具(06) 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク 70564000

エアークッションマスク

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

- 1) 他の製品と組み合わせて使用するときは、接続状態に閉塞等の危険がないことを必ず確認すること。
[死亡事故や重傷事故を招く恐れがあるため]
- 2) 使用中は患者の状態を常に監視し、回路の外れや閉塞等に充分注意すること。


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 1) 本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。
[火災の原因となるため]
- 2) 再使用禁止。一患者限りの使用とすること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状(代表例)

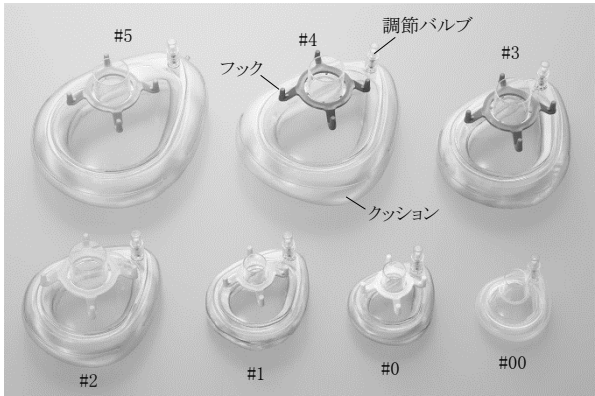

＜クッション色＞ 青:MRI 非対応 緑:MRI 対応
クリアー:MRI 非対応(#00 低出生体重児用)

2. 各部の寸法

規格	寸法	フックカラー	接続口径
#00 低出生体重児用	53×45mm	フックなし	外径 15mm
#0 新生児用	65×55mm	白	外径 15mm
#1 乳幼児用	79×67mm	ピンク	外径 15mm
#2 小児用 S	95×80mm	黄	内径 22mm
#3 小児用 L	109×86mm	緑	内径 22mm
#4 成人用 S	124×101mm	赤	内径 22mm
#5 成人用 L	130×105mm	青	内径 22mm
#6 成人用 XL	143×114mm	橙	内径 22mm

3. 原理

人工呼吸器(手動式を含む)、蘇生装置等の患者回路に接続し、患者にガスを供給する。また、調節バルブに注射器(本品に含まれない)を接続し、空気を注入することでクッション部の硬さを調節できる。

【使用目的又は効果】

人工呼吸器(手動式を含む)、蘇生装置等の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口を覆い、患者にガスを供給するためのマスクです。

【使用方法等】

- 1) 患者に適したサイズのマスクを選択します。
- 2) 使用前に各部を点検して、障害物や異物等がないことと、部品が紛失していないことを確認します。
- 3) 人工呼吸器、蘇生装置等の呼吸回路と接続します。
- 4) マスクを患者の口と鼻を覆うように密着させて使用します。

＜ヘッドストラップ(別途販売品)の使用方法＞

- 1) 患者にマスクを固定する場合は、ヘッドストラップをマスクのフックにかけて使用します。ストラップを後頭部に掛け、口と鼻に密着するようにストラップの長さを調整してください。

＜クッション部の調節＞

- 1) マスクの調節バルブにシリンジを接続して空気を注入し、マスクのクッションを適当な硬さに調節します。
- 2) 空気を注入しすぎてクッションが硬くなりすぎた場合は、シリンジを接続して空気を吸い出します。

【使用上の注意】

- 1) 本品は、ディスポーザブル製品であるため、一患者の使用で使い捨て、再使用しないこと。
- 2) 患者の呼吸量によって酸素濃度は変化する。希望の濃度が得られるように、酸素供給量を調節すること。
- 3) 使用中に発疹などが生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の指示に従うこと。
- 4) 本品を折り曲げたり、ねじったりしないこと。
[破損や閉塞の原因となる。]
- 5) 本品が汚れた場合は、消毒剤などで拭くこと。ただし、次の場合には新しい製品と交換すること。
① 目薬などの薬剤や、毛染剤・化粧品その他の色落ちする物との接触により、変色してしまった場合。
② 長期間の使用や洗剤による洗浄、アルコール清拭、軟膏等の油性薬剤などの使用により、変質もしくは硬くなってしまった場合。
- 6) 使用後は、医療廃棄物として適切に処理・廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

使用期限:3 年(自己認証データによる)
水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1
TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)

■外国製造所

国 名:台湾
製造業者:Hsiner Co., Ltd. (シーナ社)