

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ 70259000

エアウェイ

再使用禁止

【警告】

<適用対象(患者)>

- 1) 反射が残っている患者では、嘔吐反射、喉頭痙攣を誘発することがあるので注意すること。

<使用方法>

- 1) 挿入後、開口部が閉塞されていないことを確認すること。
[不適切な挿入により、十分な気道確保ができないおそれがあるため。]


【禁忌・禁止】

<使用方法>


- 1) 再使用禁止。一患者限りの使用とすること。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成(代表図)

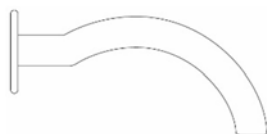

[ゲデルエアウェイ]

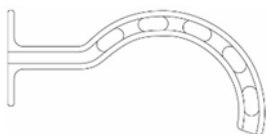

[パーマンエアウェイ]

2. 材質

ゲデルエアウェイ: ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂

パーマンエアウェイ: ポリエチレン樹脂

3. 原理

患者の口腔内に挿入することで、舌による気流遮断を防止する。

【使用目的又は効果】

短期的使用を目的として、ガス交換または吸引時に気道の開存性を維持するために口腔のみに挿入して使用する。本品は、舌による気流遮断の防止に有用である。

【使用方法等】

- (1) 適切な形状・サイズを選択する。
- (2) エアウェイ先端部を口蓋側にし、口腔内に挿入する。
- (3) 彎曲部を舌に滑らせるように挿入し、適度な深さで 180 度回転させて正しい位置に設置する。
- (4) 挿入後、気道の開通状態を確認する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 使用前に、本品の空洞部に閉塞等がないか、必ず確認すること。
- 2) 開封後、本品の外観に異常がないことを確認し、異常がある場合は使用しないこと。
- 3) 包装開封後は、すぐに使用すること。
- 4) 医師もしくは医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが本品を使用すること。
- 5) 過度の力を加えたり、無理な使用はしないこと。
[器具の損傷の原因になる。]

<相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)>

【併用注意】(併用に注意すること)

- 1) 他の製品と併用する場合は、その互換性、安全性を十分に確認した上で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 1) 水ぬれに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管する。

<有効期間>

使用期限: 3 年[自己認証データによる]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL: 048-853-3661(大代表) FAX: 048-853-0304(代表)

■外国製造所

国 名: 台湾

製造業者: Hsiner Co., Ltd. (シーナ社)